


# Cleanic<sup>®</sup>

La pâte de prophylaxie tout-en-un



## TOUT-EN-UN

Pâte de prophylaxie universelle garantissant des résultats remarquables

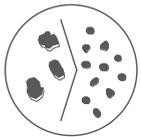

## TECHNOLOGIE PERLITE BREVETÉE

Variabilité d'abrasion intégrée



## SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉE

Nettoyage et polissage optimaux avec une abrasion minimale de l'émail et la dentine



## GAIN DE TEMPS

Du nettoyage au polissage en un temps



**Cleanic** est l'unique pâte de prophylaxie en un temps qui garantit à vos patients un nettoyage & un polissage de haute qualité avec une abrasion réduite des dents et une procédure en un temps grâce à la variabilité intrinsèque du pouvoir abrasif des particules de perlite naturelle.

## LORSQUE LES PÂTES DE PROPHYLAXIE TRADITIONNELLES NE SUFFISENT PAS...

Les pâtes traditionnelles, généralement à base de pierre ponce, ont tendance à abîmer l'émail, la dentine et les obturations, provoquant :



Elles requièrent également deux fois plus de travail, à savoir deux pâtes abrasives au minimum, pour être efficaces. Conséquence : le polissage est souvent omis afin de gagner du temps. La surface non polie se décolore progressivement et la plaque s'accumule.

## VARIABILITÉ D'ABRASION INTÉGRÉE


L'abrasivité des particules de perlite volcanique (silice naturelle) change au cours de la procédure.

### NETTOYAGE

Lors de la première application sur une surface dentaire, Cleanic a une consistance granuleuse. Son pouvoir nettoyant est alors maximal.

### POLISSAGE

Les particules abrasives sollicitées se désintègrent et deviennent en quelques secondes plus rondes et moins tranchantes. À ce stade, la pâte devient efficace pour un polissage haute brillance.

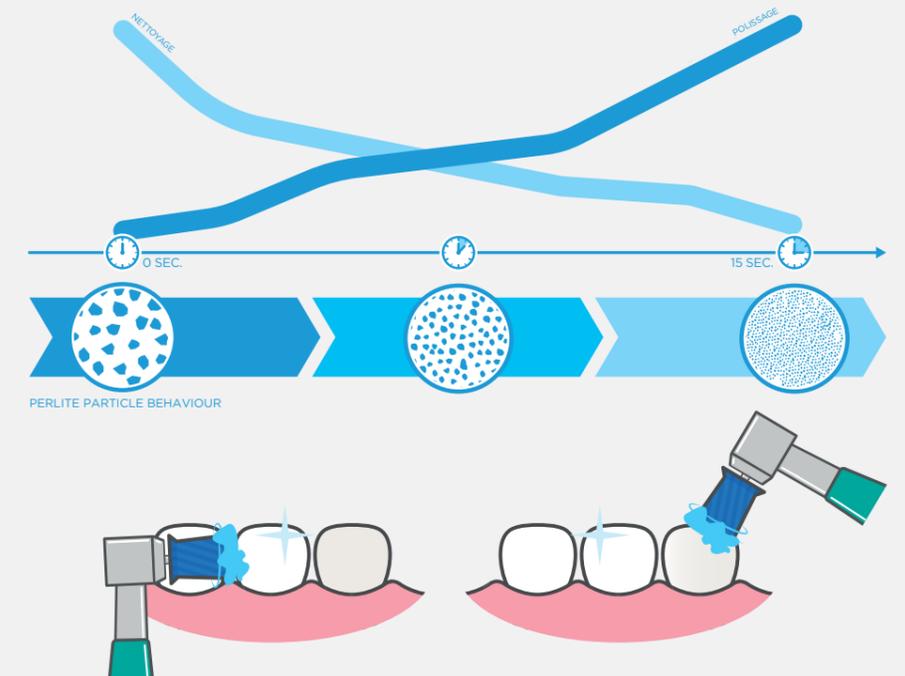

## EN QUOI CLEANIC EST-ELLE DIFFÉRENTE ?


Cleanic est **une pâte prophylactique de nettoyage et de polissage tout-en-un originale**, qui est fondée sur la technologie perlite.

Elle permet un nettoyage et un polissage doux, mais efficace en une seule séance et avec une seule pâte.



## COMMENT UTILISER CLEANIC

Appliquez la pâte Cleanic sur un petit groupe de dents (trois environ) avec une cupule en caoutchouc (Pro-Cups p. ex.) pour nettoyer et polir en un seul temps. Une fois cette opération terminée, appliquez une quantité de pâte Cleanic fraîche sur le groupe de dents suivant.

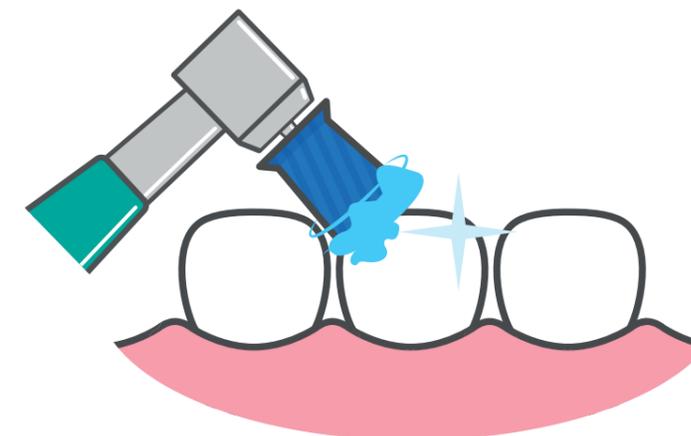

### POUR UNE DENTITION NORMALE :

Traitez la surface incisale/occlusale de chaque dent, puis avancez en direction de la zone gingivale afin de minimiser l'effet abrasif sur la dent.

### EN CAS D'EXPOSITION DE LA DENTINE OU DES SURFACES RADICULAIRES :

Commencez par appliquer une quantité de pâte fraîche sur l'émail dentaire. Traitez ensuite les surfaces radiculaires ou la dentine avec la pâte usagée et donc moins abrasive.

## COMMANDEZ VOTRE CLEANIC DÈS MAINTENANT !


Part No.	Description	Content	Fluoride	RDA	REA	Taste	Menthol	Paste Colour
3110	Réassort cartouche	200g	0.15% CaF	27	3.4	Mint	Y	Light blue
3130	Réassort cartouche	100g	0.15% CaF	27	3.4	Mint	Y	Light blue
3210	Réassort cartouche - sans fluor	200g	-	27	3.4	Mint	Y	Light blue
3230	Réassort cartouche - sans fluor	100g	-	27	3.4	Mint	Y	Light blue
3140	Unidoses	200x 2g	0.10% NaF	27	3.4	Mint	Y	Dark blue
3180	Cleanic en tube menthe	100g	0.10% NaF	27	3.4	Mint	Y	Blue
3182	Cleanic en tube pomme verte	100g	0.10% NaF	27	3.4	Green Apple	N	Green
3183	Cleanic en tube menthe sans fluore	100g	-	27	3.4	Mint	Y	Light blue
3184	Cleanic en tube Light	100g	0.10% NaF	27	3.4	--	N	Light grey
3186	Cleanic en tube fruits rouges	100g	0.10% NaF	27	3.4	Red fruits	N	Pink
3190	Cleanic Collection Kit	3x 100g de Cleanic en tube avec fluorures (Menthe, Pomme Verte sans menthol, Light sans arôme ni colorant artificiel), 1 presse tube, 1 brochure, 1 sachet réutilisable						

## ESSAYEZ CLEANIC AVEC DES ACCESSOIRES PARFAITEMENT CONÇUS !

### Pro-Cup et Pro-Cup Junior

Le profil laminé de ces cupules à usage unique permet d'éviter les éclaboussures lors de l'application de la pâte de prophylaxie. Ce même profil contribue également à limiter la surchauffe. Pro-Cup et Pro-Cup Junior ne contiennent pas de latex naturel.

	CODES & QUANTITIES				COULEUR	DESCRIPTION	TYPES		SINGLE USE
	RÉF. ART.	LOT DE	RÉF. ART.	LOT DE			pour CA	à vis	
Pro-Cup	990/30	30	990/120	120	●	Pro-Cup - souple	✓		✓
	991/30	30	991/120	120	●	Pro-Cup - dure	✓		✓
	1810/30	30	1810/120	120	●	Pro-Cup - souple		✓	✓
	1811/30	30	1811/120	120	●	Pro-Cup - dure		✓	✓
Pro-Cup Junior	992/30	30	992/120	120	●	Pro-Cup Junior - souple	✓		✓
	993/30	30	993/120	120	●	Pro-Cup Junior - dure	✓		✓
	1812/30	30	1812/120	120	●	Pro-Cup Junior - souple		✓	✓
	1813/30	30			●	Pro-Cup Junior - dure		✓	✓

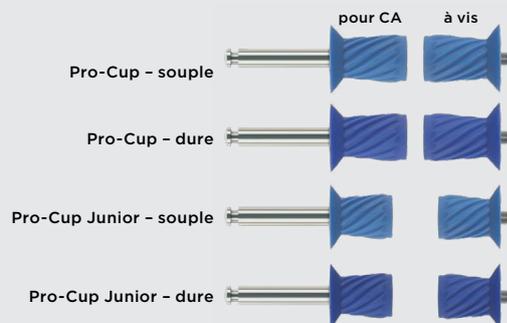

### Godets bagues de Kerr

Disponibles en version à usage unique et réutilisable, ces godets bagues ergonomiques à utiliser avec la pâte de prophylaxie s'ajustent aisément à votre doigt et ont une contenance suffisante pour les applications nécessitant de grandes quantités de pâte.

Godet bague - Non autoclavable

Réf. art.	Description
985	Godet bague – Blue – lot de 100
986	Godet bague – Assortiment de couleurs – lot de 100

Prophy Clips - Autoclavable

Réf. art.	Description
3151	Prophy Clips – lot de 6

Dispositif Médical (DM) Classe I et IIa pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'ensemble des produits présentés sur cette vidéo est fabriqué par la société Kerr - Organisme notifié: 0086 - Date de parution juin 2017