

Endy NT2 | le micromoteur avec lumière intégrée



VOUS RECHERCHEZ UN APPAREIL PERFORMANT, OFFRANT UNE PRISE EN MAIN OPTIMALE ?

Avec l'Endy NT2, profitez d'une solution conçue sur-mesure, alliant autonomie et confort d'utilisation

un moteur équilibré et compact avec LED auto-clivable à 134°

La LED blanche située sous le contre-angle permet d'éclairer le champ opératoire sans provoquer d'ombre ni altérer votre visibilité.

une large plage de vitesse avec un seul contre angle

L'Endy NT2 vous permet de régler la vitesse pour votre lime de 250 à 1200 tours par minute avec le même contre-angle. **Une seule machine suffit pour traiter l'ensemble de vos élargissements canaux.**

une vitesse et un couple constants

La vitesse de l'Endy NT2 reste constante quelque soit l'effort de la lime dans le canal. Elle ne varie pas, même si la batterie est déchargée à plus de 50%. Le couple est contrôlé en permanence pour préserver vos limes.

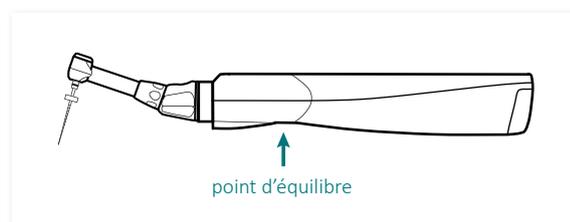


Schéma appareil

VOTRE PARTENAIRE DEPUIS + DE 25 ANS

Créée en 1993 et implantée en France en région bordelaise, la société IONYX conçoit et fabrique des machines spécialisées en endodontie. Destinée aux omnipraticiens soucieux d'améliorer la qualité de leurs traitements ainsi que leur confort, toute la gamme IONYX est pensée pour une pratique quotidienne et facile.

Présent partout dans le monde grâce à son large réseau de distributeurs, IONYX est l'un des spécialistes les plus reconnus dans le domaine du dentaire.



Endy NT2

micromoteur avec lumière intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

un arrêt rapide du moteur

Dès que le couple programmé est atteint, votre moteur s'arrête rapidement grâce à un blocage électronique, ce qui vous permet de limiter le risque de fracture de l'instrument.

un retour à vitesse lente et débrayable

Technologie utilisée par IONYX depuis 1996, le retour à vitesse lente d'1 seconde vous permet de dégager l'instrument sans refouler de débris dentinaires vers l'apex.

une grande autonomie avec sa batterie Li-ion

L'Endy NT2 vous permet de travailler en autonomie durant 1 heure avec un couple moyen de 1,5N.cm. (40 traitements canalaires en moyenne constatés).

chargeur rapide

Son chargeur rapide lui permet de recharger complètement votre batterie en 2 heures. Votre batterie est protégée contre les courts circuits et tout échauffement durant la charge, vous garantissant une sécurité totale. Un voyant rouge vous indique que la batterie s'est mise en sécurité.

10 mémoires

L'Endy NT2 possède 10 mémoires vous permettant de programmer autant de couples et vitesses adaptés pour chaque lime utilisée. Sa programmation est simple et intuitive.



vue de côté



vue de face

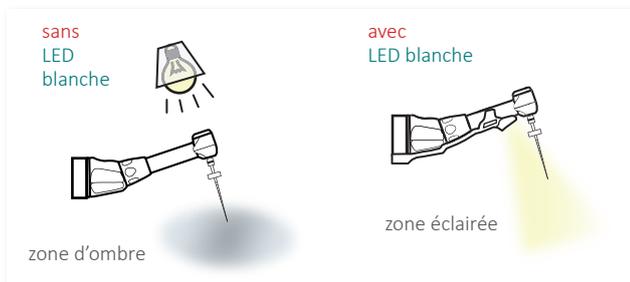


Schéma LED autoclavable

Le boîtier électronique de l'Endy NT2 est garanti 2 ans.
Le contre-angle, la batterie et les accessoires sont garantis 1 an.

Découvrez les autres produits de la gamme ionyx



Locapex 6
le nouveau
localisateur d'apex
conçu par ionyx

Endy 6200
micromoteur
avec localisateur d'apex



ionyx

34 rue de Fleurenne
F-33290 BLANQUEFORT

T. +33 5 56 35 34 27
F. +33 5 56 95 16 20

ionyx@ionyx.eu
www.ionyx.eu

