



ergo

**Un Complément ergonomique pour
L'ENDODONTIE**

- ERGO est un bracelet en silicone autoclavable qui permet une organisation rationnelle des limes endodontiques


- Rangez les limes manuelles dans l'éponge bleue

- Nettoyez les limes **DURANT** la rotation dans l'éponge grise

- Mesurez la longueur de travail sur la réglette incorporée

- Positionnez dans les 5 logements latéraux les limes rotatives et chargez les sur le contre angle **SANS** stopper la rotation !!

- Entièrement Autoclavable

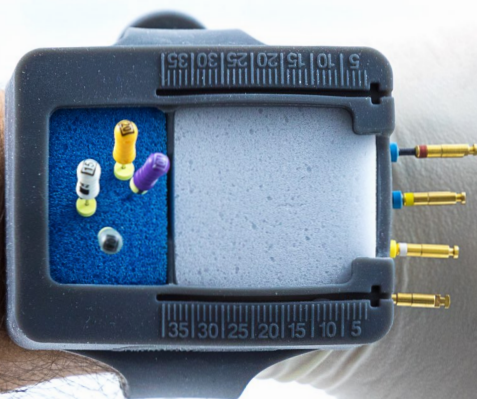

STYLE ITALIANO™
ENDODONTICS

Produit conçu en collaboration
avec le groupe de praticiens
experts de Style Italiano




Regardez la vidéo



Eponge Bleue

Stockage et nettoyage des instrument manuels

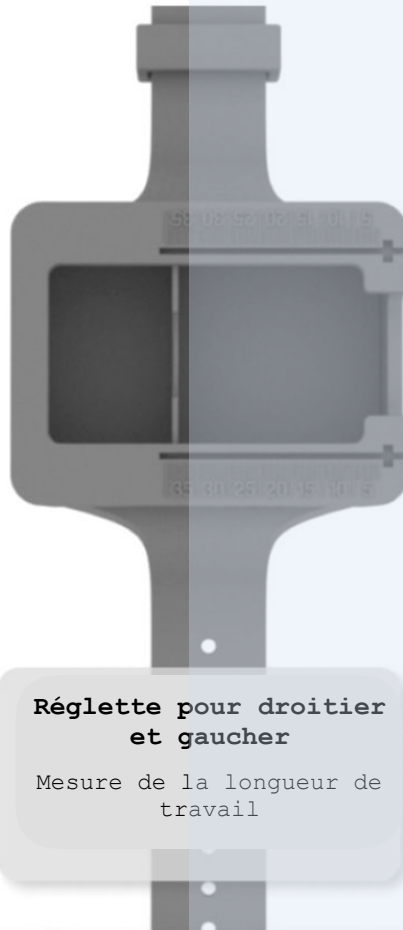


Réglette pour droitier et gaucher

Mesure de la longueur de travail



Nettoyage idéal en rotation sans arrêter la lime !!

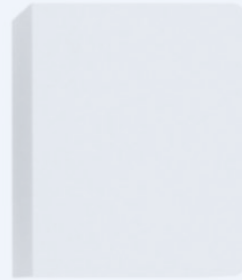


Eponge grise

Nettoie les instruments en rotation

Les éponges bleues et grises peuvent être imbibées d'Hypochlorite de Sodium pour une meilleure efficacité

Les éponges bleues et grises sont à usage unique et peuvent être autoclavées avant l'usage

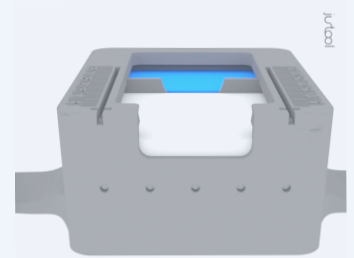

Logements pour limes rotatives

Insérez votre sequence instrumentale et changez la lime directement dans le contre angles **EN ROTATION**



FABRIQUE EN ITALIE

Distribution exclusive GÉNÉRIQUE INTERNATIONAL
77 rue Pierre Brossolette - 93160 Noisy le Grand
Tel: 0143030684 - Fax: 0143031598

www.generiqueinternational.com - generinter@aol.com

