


EQUIA Forte de GC



Le nouveau
verre-ionomère de
restauration haute densité,
plus facile et
plus résistant !

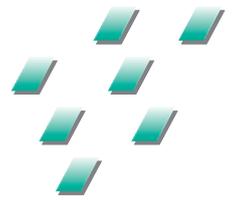

GC

Le système EQUIA, élevé au


EQUIA Forte est la nouvelle innovation de GC en matière de verre ionomère. EQUIA Forte Fil et EQUIA Forte Coat, utilisés en synergie permettent d'obtenir une restauration postérieure « bulk » plus résistante.

Ce système de restauration exclusif adapté à toutes les générations va vous impressionner à tous niveaux : EQUIA Forte issu du système EQUIA est validé depuis 7 ans par de nombreuses publications et recherches scientifiques comme une restauration à « long terme ». EQUIA Forte améliore résistance mécanique et esthétique pour répondre aux attentes de tous vos patients et devenir une excellente alternative quotidienne.

Verre ionomère Haute Densité

EQUIA Forte Fil permet, par l'introduction d'une nouvelle technologie « haute densité », de réaliser rapidement des obturations esthétiques et résistantes. Ce nouveau système utilise les avantages des différentes technologies de tailles de particules. Les charges de verre classiques d'EQUIA Forte Fil sont complétées par de nouvelles charges ultrafines très réactives, qui accélèrent la formation de la matrice après mélange. Cette technologie innovante augmente l'échange ionique et renforce la structure de la matrice, les propriétés physiques, et la libération du fluor.

Résistance à la fracture

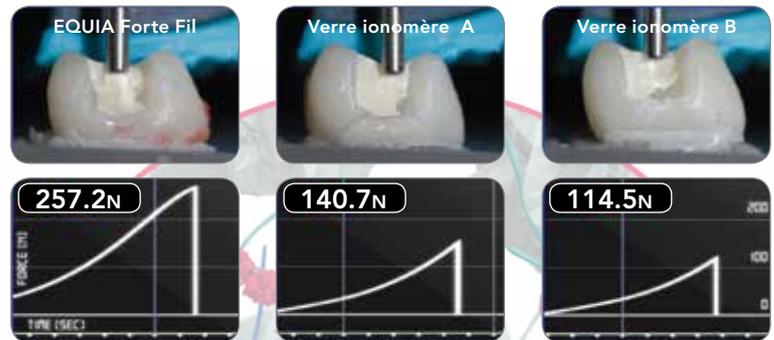

Source: University of Zagreb

Adhère naturellement

Ni conditionner, ni agent de collage du fait de son adhésion universelle et de sa mouillabilité. EQUIA Forte est extrêmement tolérant et adhère à toutes les surfaces indépendamment de l'âge de la dent. De l'émail « jeune » jusqu'à la dentine sclérotique... avec EQUIA Forte vous n'avez pas besoin d'adapter vos procédures.


Autre avantage : aucune rétraction ou stress de polymérisation pendant la prise.



Adhésion naturelle à la dent

niveau supérieur.

Une étroite synergie

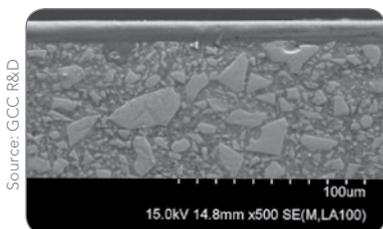

Fine couche d EQUIA Forte Coat



Résultat final

EQUIA Forte Coat agit comme un composite liquide qui améliore la translucidité et l'esthétique. Doté d'un nouveau monomère multifonctionnel et de la technologie brevetée « mono dispersion nano chargée », GC EQUIA Forte Coat sublime vos restaurations. EQUIA Forte Coat s'applique au pinceau ou microbrush et doit être photopolymérisé pour obtenir une résistance à l'usure élevée et une résistance à la flexion décuplée.

Réellement innovant

Travaillant en synergie avec les concepts modernes de la dentisterie « Minimal Invasive », ces matériaux de haute technologie font d'EQUIA Forte, un système de restauration innovant, biomimétique, libérant du fluor, facile et rapide à mettre en place. Basé sur la technologie du verre ionomère EQUIA Forte est sans risque pour la pulpe et peut être utilisé dans des cavités profondes. La manipulation est aisée et reste indépendante de l'âge ou du site de la restauration. Préparer, obturer en bloc, finir, appliquer le coat, photopolymériser ... quelques étapes faciles pour des résultats parfaits.



Cavité profonde

Cliniquement prouvé

EQUIA Forte s'appuie sur les performances d'essais cliniques du système EQUIA original et se présente comme une alternative durable pour les restaurations des dents postérieures. Avec cette nouvelle technologie de verre haute densité, EQUIA Forte élargit les recommandations d'utilisation des préparations de cavité de classe II (sans cuspidés).



Cavité étendue

Fine couche
fluide de vernis

Sans risque
pour la pulpe.
Peut être utilisé dans
les cavités profondes



Résultats de l'Université Greifswald (Allemagne) – essai clinique montrant sur 4 ans un taux de fracture des obturations EQUIA inférieures à 3%. D'autres essais clinique réalisés par l'Université Hacettepe (Turquie) couvrant une période de quatre ans, montre que le système innovant EQUIA montre les mêmes performances qu'une composite de restauration micro chargée.

* Gurgan et.al, Operative Dentistry, 2015, 40-1

Préparation



Obturation en bloc



Application du vernis



Photopolymérisation



Peu
d'étapes
pour un
résultat
parfait

EQUIA Forte d'un seul coup d'oeil

- Le système ne nécessite aucune stratification et est non collant. Il est condensable et s'adapte aux parois de la cavité
- Avec quasiment aucun stress de rétraction, EQUIA Forte peut être considéré comme un véritable matériau d'obturation en bloc, même pour des cavités profondes
- L'utilisation d'une digue est facultative et l'adhésion chimique élimine les procédures d'assemblage compliquées.
- Ni procédure complexe de finition, ni polissage... une seule application de EQUIA Forte Coat suffit
- Surface lisse durable, brillance naturelle beaucoup plus facile
- Temps total de la procédure d'environ 3'30''
- Résistance augmentée du verre ionomère dans le temps grâce à l'effet de maturation unique attribué à la salive
- Indications étendues par rapport à l'EQUIA.



EQUIA
FORTE

Le système EQUIA Forte est disponible en différentes teintes et en packaging panaché, incluant des capsules d'EQUIA Forte fil et un flacon d'EQUIA Forte Coat. EQUIA Forte Fil est disponible en teintes Vita® suivantes : A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3 and C4.

*Ces temps sont basés sur les expériences du fabricant.



Mentions obligatoires

Equia Forte, indications : cavités de classe I et II, restaurations cervicales, faux moignons. Classe IIa

Dispositif médical pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans le mode d'emploi avant toute utilisation. Organisme certificateur : n°0086 - Distribué par GC France

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC BENELUX B.V.
Edisonbaan 12
NL-3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00
Fax. +31.30.605.59.86
info@benelux.gceurope.com
http://benelux.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.
9 bis, Avenue du Bouton d'Or
– BP 166
F-94384 Bonneuil sur Marne Cedex
Tel. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.49.80.37.90
info@france.gceurope.com
http://france.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Bergstrasse 31
CH-8890 Flums
Tel. 41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info@switzerland.gceurope.com
http://switzerland.gceurope.com

GC