

alghamix II



Equipment
Mixing machine

Zhermack 
Dental

alghamix II



ZHERMACK, leader mondial dans la production de matériaux d'empreinte et de matériels dentaires, présente **ALGHAMIX II**, la **nouvelle version du mélangeur mécanique** parmi les plus connus sur le marché.

Le **design ergonomique** permet à **ALGHAMIX II** de s'adapter à tous les cabinets et laboratoires.

Extrêmement **simple à utiliser**, il garantit des mélanges parfaits sans bulles d'air.

ALGHAMIX II permet de mélanger mécaniquement les **alginates, les plâtres et les silicones** dans le domaine dentaire

Design Moderne



alghamix II

APPLICATIONS

■ Mélange d'alginate



■ Mélange du silicone



■ Mélange du plâtre



Le **bol**, en **position frontale**, facilite les opérations de dosage et de mélange, en garantissant, en même temps, une **stabilité maximale** pendant toutes les phases d'élaboration.

**Maximum
de stabilité**

CARACTÉRISTIQUES

alghamix II

- 2 vitesses de rotation du bol (120 tours/min – 250 tours/min)
- Sélectionneur de vitesse ergonomique
- Crochet du bol à baïonnette
- Bols disponibles: petit de 350 cc. grand de 600 cc.
- Plaque avec bloc de mélange pour silicones
- Pas besoin de lubrification
- Pas besoin de maintenance





■ **DOUBLE VITESSE:**

les 2 vitesses de rotation du bol (lente et rapide) permettent de moduler le mélange selon les besoins de l'utilisateur

■ **SÉLECTIONNEUR ERGONOMIQUE:**

le sélectionneur de vitesse, grâce à sa forme ergonomique, rend extrêmement naturel le mouvement de sélection de la vitesse

■ **CROCHET À BAÏONNETTE:**

la fixation à baïonnette avec indicateur de position simplifie l'accrochage du bol

alghamix II

EN ÉVIDENCE



■ **BOLS POUR ALGINATES:**

disponible dans la version de 350 cc.



■ **BOL POUR PLÂTRES:**

disponible dans la version de 600 cc.



■ **BLOC DE MÉLANGE POUR SILICONES:**

avec échelle de dosage de 20 feuilles



ALGHAMIX II garantit l'homogénéité maximale du mélange sans aucune bulle d'air ni grumeaux


ALGHAMIX II réduit le temps de mélange de 30%.*

alghamix II

TECHNIQUE EN ÉVIDENCE



Agrandissement d'un mélange manuel d'alginate

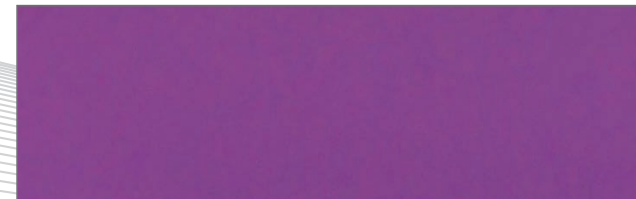

Agrandissement d'un mélange automatique d'alginate avec ALGHAMIX II



Drogum 5

alghamix II

alghamix II



F141029 - 18-03

Modèles

Code	Modèle	Mesures externes	Poids	Tension d'alimentation	Puissance absorbée
C303215	ALGHAMIX II 115V	P 270 – L 170 – A 210 mm	3 kg	115 V ± 10 50/60 Hz	50 Watt
C303230	ALGHAMIX II 230V	P 270 – L 170 – A 210 mm	3 kg	230 V ± 10 50/60 Hz	50 Watt
C303231	ALGHAMIX II 230V UK	P 270 – L 170 – A 210 mm	3 kg	230 V ± 10 50/60 Hz	50 Watt

Équipement de série

Modèle
Bol pour alginate gris 350 cc.
Spatule de mélange

Accessoires

C303165	ALGHAMIX II BOL 350 cc. BLEU	C300990	Spatules fluo 6 pièces
C303185	ALGHAMIX II BOL PLÂTRE 600 cc. GRIS	C303030	Bloc de mélange 20 feuilles
XR0250670	Disque pour mélange silicones	C207200	Spatules pour mélange silicones

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack