

Aperçu des inserts KaVo SONICflex

SONICflex®

Livre des inserts.




Nouvelles applications

Stripping / Shaping
Élongation coronaire
chirurgical




KaVo. Dental Excellence.

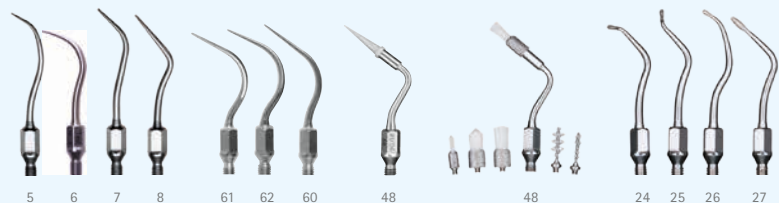

scaler | paro | implant | clean | rootplaner




micro | bevel | stripping, shaping | seal | caries

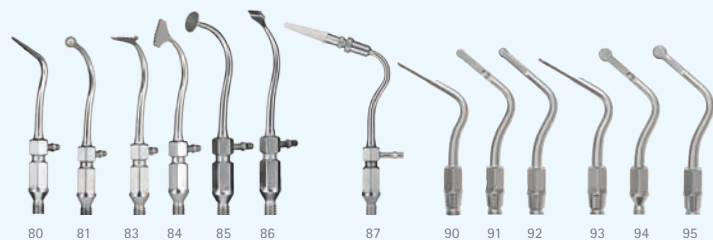

bone | crown extension



endo | retro

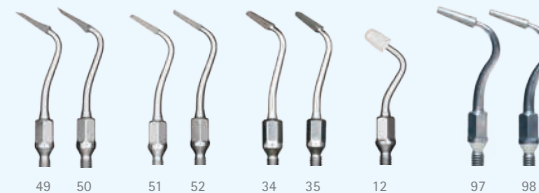

gold | ceram | CAD/CAM | cem | crown

À la pointe de la polyvalence.

Grâce aux indications variées dont vous disposez avec SONICflex, il deviendra rapidement l'un de vos instruments les plus utilisés.

Ses nombreux inserts lui permettent de s'adapter exactement à vos besoins.

Options variées – vos atouts et avantages :

- Davantage d'inserts et ainsi de possibilités d'utilisation que tous les autres détartreurs
- Plus de 50 inserts différents
- Pour tous les domaines d'application
- La base d'un traitement invasif minimal réussi



Aperçu des instruments SONICflex®.

KaVo master series



Changement d'insert rapide et confortable - seulement un tour également avec la connexion pour les raccords Sirona

KaVo expert series



KaVo smart series



Faites progresser chaque jour vos performances.

Avec votre KaVo SONICflex, vous disposez du détartreur le plus puissant et le plus silencieux de sa catégorie. Il est sans aucun doute l'instrument ayant la plus large gamme d'indications. Il sera votre allié fiable grâce aux niveaux de puissance réglables selon les indications pour être à la fois puissant et précis.

Technique supérieure – Vos atouts et avantages :

- Puissance réglable sur trois niveaux – condition de travail optimisée à chaque utilisation
- Sensiblement plus silencieux que ses concurrents directs (jusqu'à 15 dB) – protection de la santé pour l'équipe du cabinet et les patients
- Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire ; il suffit de brancher sur le raccord KaVo MULTiflex ou Sirona, sans ajout de câbles gênants
- Meilleure illumination : 25 000 Lux, pour une vision détendue sans fatigue des yeux
- Qualité KaVo proverbiale – le SONICflex 2008 L est déjà le représentant de la troisième génération de détartreurs chez KaVo, issue de 25 années d'expérience et de connaissances

Insert SONICflex scaler n° 5

Traitement : pour éliminer le tartre sur de grandes surfaces
 Forme : Universel



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5171
 1.005.8949

Insert SONICflex scaler n° 8

Traitement : pour éliminer le tartre supra- et sous-gingival
 Forme : paro, extra long



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5371
 1.006.1953

Insert SONICflex scaler n° 6

Traitement : pour éliminer le tartre supra-gingival sur de grandes surfaces
 Forme : Faucille



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




0.571.5181
 1.005.8950

Insert SONICflex scaler n° 7

Traitement : pour éliminer le tartre supra-gingival sur de grandes surfaces
 Forme : Paro



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

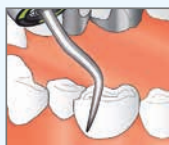


0.571.5191
 1.005.8951

Insert SONICflex scaler n° 48

Traitement : élimination des plaques, nettoyage des fissures, nettoyage des cavités et des moignons pour couronnes
 Forme : différents embouts, balais à usage unique



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
 clean brosse n° 1
 clean brosse n° 2
 clean brosse n° 3
 clean brosse n° 4
 clean brosse n° 5
 clean brosse n° 6
 Insert n° 48
 Insert n° 48 A

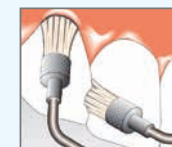

0.571.0001
 1.006.2026
 0.571.0402
 0.571.0412
 0.571.0422
 0.571.0432
 0.571.0472
 0.571.0482
 0.571.0401
 1.006.1982

Prophylaxie

Insert SONICflex paro n° 60

Traitement : : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; Pour les incisives, les surfaces lisses

Forme : insert long et droit - surface arrondie



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.7402
1.006.1934

Insert SONICflex paro n° 61

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; pour prémolaires, molaires

Forme : insert plié, **gauche** - surface arrondie



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.7412
1.006.1935

Insert SONICflex paro n° 62

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; pour prémolaires, molaires

Forme : insert plié, **droite** - surface arrondie



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.7422
1.006.1936


Insert SONICflex implant

Traitement : retrait efficace de dépôts et concrétions sous-gingivales en cas d'implants

Forme : inserts cunéiformes,, partie en plastique à usage unique (PEEK)



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
Partie en plastique à usage unique (30 pcs)

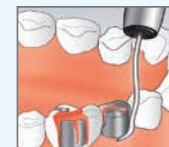

1.003.8167
1.006.2027
1.003.8168

Parodontologie

Insert SONICflex® rootplaner n° 24

Traitement : pour furcations difficilement accessibles, permet également l'accès aux entrées proximales des furcations dans le cas où la rangée dentaire est fermée

Forme : bouton à contre-angle, petit, **gauche**, diamantation D25



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5621
1.006.1957

Insert SONICflex® rootplaner n° 27

Traitement : nettoyage efficace de surfaces lisses et de concavités

Forme : paro extra long, bouton, **grand** ; diamantation D25



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5651
1.006.1963

Insert SONICflex® rootplaner n° 25

Traitement : pour furcations difficilement accessibles, permet également l'accès aux entrées proximales des furcations dans le cas où la rangée dentaire est fermée

Forme : bouton à contre-angle, petit, **droite**, diamantation D25



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5631
1.006.1959

Insert SONICflex® rootplaner n° 26

Traitement : nettoyage efficace de surfaces lisses et de concavités

Forme : universel, bouton, petit ; diamantation D25



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5641
1.006.1961

Parodontologie



Insert SONICflex micro n° 30

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
 Forme : petite demi-sphère, mésiale, diamantation D46




N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6811
1.006.1969

Insert SONICflex micro n° 33

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
 Forme : grande demi-sphère, distale, diamantation D46

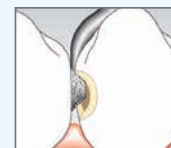


N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6821
1.006.1975

Insert SONICflex micro n° 31

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
 Forme : petite demi-sphère, distale, diamantation D46

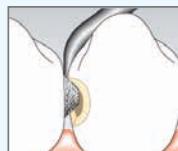


N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6801
1.006.1971

Insert SONICflex bevel n° 58

Traitement : les bords proximaux des cavités sont coupés en biais
 Forme : mésiale, diamantation D46

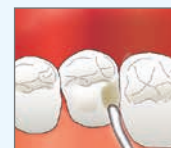


N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7392
1.006.1988

Insert SONICflex micro n° 32

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
 Forme : grande demi-sphère, mésiale, diamantation D46

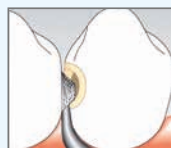

N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6831
1.006.1973

Insert SONICflex bevel n° 59

Traitement : les bords proximaux des cavités sont coupés en biais
 Forme : distale, diamantation D46




N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7382
1.006.1990

Invasif au minimum

SONICflex seal insert n° 45

Traitement : préparation invasive minimale de fissures, perçage de fissures
 Forme : cône, insert droit Ø 0,5 mm, diamantation D 46

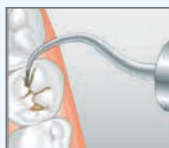

N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.8323
 1.007.1506

Insert SONICflex cariex TC n° 71

Traitement : élimination par couches de la partie principale de la substance cariée
 Forme : forme de bille, Ø 1,0 mm, métal dur



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7362
 1.006.2002

Insert SONICflex cariex D n° 42

Traitement : fine excavation de caries conservatrice pour la substance et sonoabrasive
 Forme : forme de bille, Ø 0,8 mm, diamantation D 64



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7105
 1.006.1980

Insert SONICflex cariex TC n° 72

Traitement : élimination par couches de la partie principale de la substance cariée
 Forme : forme de bille, Ø 1,4 mm, métal dur



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7363
 1.006.2004

Insert SONICflex cariex D n° 43

Traitement : fine excavation de caries conservatrice pour la substance et sonoabrasive
 Forme : forme de bille, Ø 1,2 mm, diamantation D 64



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.000.7167
 1.006.1981

Invasif au minimum

Insert SONICflex prep gold n° 49, mésial

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale selon la «préparation de gros» effectuée de manière rotative ; une meilleure restauration technique des dents est ainsi possible

Forme : **mésiale**, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60° cervical - 30°, diamantation D 46

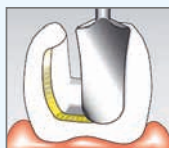


N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7212
1.006.1983

Insert SONICflex® prep ceram n° 52

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale, transitions harmonieuses des zones marginales cervicales et latérales

Forme : **distale**, inserts avec angles de coupe définis, latéral - 60°, cervical - 75°, diamantation D 46

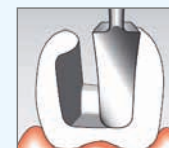


N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7272
1.006.1986

Insert SONICflex prep gold n° 50, distal

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale selon la «préparation de gros» effectuée de manière rotative, une meilleure restauration technique des dents est ainsi possible

Forme : **distale**, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60°, cervical - 30°, diamantation D 46

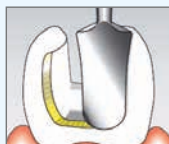

N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7222
1.006.1984

Insert SONICflex® prep ceram n° 51

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale, transitions harmonieuses des zones marginales cervicales et latérales

Forme : **mésiale**, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60°, cervical - 75°, diamantation D 46



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


0.571.7262
1.006.1985

Prothèse dentaire

Insert SONICflex prep CAO/FAO n° 34

Traitement : accord parfait de la préparation des cavités sur les processus de travail technique dans les systèmes CAO-FAO

Forme : **mésiale**, angle latéral de 30°, angle cervical de 90°, diamantation D 46

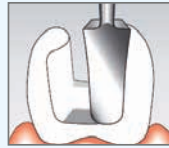


N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.002.1984
1.006.1977

Insert SONICflex prep CAO/FAO n° 35

Traitement : accord parfait de la préparation des cavités sur les processus de travail technique dans les systèmes CAO-FAO

Forme : **distale**, angle latéral de 30°, angle cervical de 90°, diamantation D 46

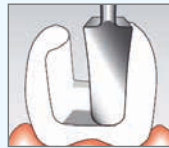

N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.002.1986
1.006.1979

Insert SONICflex stripping n° 73

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : plat, mésial, diamanté, (D 25)



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2993
1.011.2994

Insert SONICflex stripping n° 74

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation, proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : plat, distale, diamanté, (D 25)



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.011.2995
1.011.2996

Prothèse dentaire

Insert SONICflex shaping n° 75

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire
 Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
 Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
 Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : convexe, mésial, diamanté, (D 25)

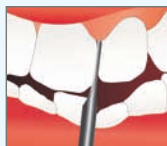

N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2997
 1.011.2998

Insert SONICflex shaping n° 76

Traitement: Séparation avant le début de la préparation coronaire
 Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
 Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
 Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : convexe, distale, diamanté, (D 25)



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2999
 1.011.3000

Insert SONICflex cem n° 12

Traitement : Pose en douceur d'inlays
 Forme : bouchon arrondi en plastique



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
 Embout Cem


0.571.5431
 1.006.2021
 0.571.7142

Insert SONICflex crown prep n° 97

*disponible à partir du 16 mai

Traitement : préparation corono-périphériques (moignons)- l'idéal pour cette indication est la combinaison d'instruments de préparation rotatifs pour couronnes et d'inserts sonores.

Forme : rayon, diamantation D46

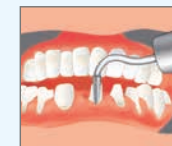

N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L et 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.008.6383
 1.008.6384

Insert SONICflex crown prep n° 98

*disponible à partir du 16 mai

Traitement : préparation corono-périphériques (moignons) - l'idéal pour cette indication est la combinaison d'instruments de préparation rotatifs pour couronnes et d'inserts sonores.

Forme : plat, diamantation D46



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L et 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S

1.008.6385
 1.008.6386

Prothèse dentaire

Insert SONICflex retro n° 56

Traitement : Recherche du canal radiculaire.
Travail considérablement facilité en ce qui concerne la préparation rétrograde réelle des cavités

Forme : insert cylindrique extrêmement étroit, **gauche**, diamantation D 46




N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7322
1.006.2040

Insert SONICflex retro n° 17

Traitement : préparation du canal radiculaire, accès considérablement facilité en cas de forte courbure articulaire

Forme : droite, petit cylindre, diamantation D 64

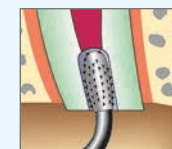

N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5581
1.006.2035

Insert SONICflex retro n° 57

Traitement : Recherche du canal radiculaire.
Travail considérablement facilité en ce qui concerne la préparation rétrograde réelle des cavités

Forme : insert cylindrique extrêmement étroit, **droite**, diamantation D 46




N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7332
1.006.2041

Insert SONICflex retro n° 20 et n° 21

Traitement : Préparation de l'incision inférieure. Préparation, adaptée aux axes, du canal radiculaire en cas de défaut minimal des os

Forme : en forme de poire, **petit, gauche** (n° 20), **droite** (n° 21), diamantation D 64

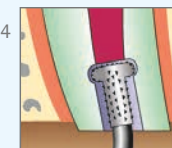

N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5521
1.006.2037



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5561
1.006.2038

Insert SONICflex retro n° 16

Traitement : préparation du canal radiculaire, accès considérablement facilité en cas de forte courbure articulaire

Forme : gauche, petit cylindre, diamanté D 64



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5541
1.006.2036

Insert SONICflex retro n° 55

Traitement : pour les racines dont les pointes sont fortement inclinées vers l'oral

Forme : diamantation D 46



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7342
1.006.2039

Résection apicale

Insert SONICflex endo n° 66

Traitement : Mise en oeuvre de la cavité d'accès, élimination d'excédents
 Forme : bouton, **grand** ; diamantation D 46



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.5825
 1.006.1992

Insert SONICflex endo n° 67

Traitement : Extension de grands canaux
 Forme : konisch **125°**, Diamantierung D 46



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.000.5822
 1.006.1994

Insert SONICflex endo n° 68

Traitement : Extension de grands canaux
 Forme : cônica **112°**, diamantation D 46



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.000.5823
 1.006.1996

Insert SONICflex endo n° 69

Traitement : Élimination de résidus de remplissage du canal radiaire
 Forme : bouton, **petit**, diamantation D 46



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

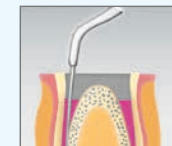


1.000.5827
 1.006.1998

Insert SONICflex endo n° 70

Traitement : pour canaux particulièrement longs et larges
 Forme : cônica **117°**, diamantation D 25
 la partie avant n'est pas diamantée



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

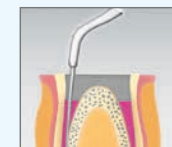

1.000.5821
 1.006.2000

Insert SONICflex Endo clean n° 96


*disponible à partir du 16 mai

Traitement : pour le rinçage du canal radiaire, l'élimination des débris et de la boue dentinaire (smear layer) et potentialisation de l'action de la solution de rinçage antibactérienne.
 Forme : angles de 105° et de 75°



N° de commande : adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex Endo clean set A	1.007.1142	Aiguilles Endo clean pour SONICflex 2000 N / L, 2003 et 2008
Insert SONICflex Endo clean A	1.008.5164	SONICflex Endo clean 015 blanc
adapté à SONICflex 2000 N / L et 2003 / L		SONICflex Endo clean 020 jaune
Insert SONICflex Endo clean	1.008.5163	SONICflex Endo clean 025 rouge
SONICflex Endo clean set	1.006.2045	

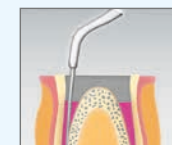

Endodontie

Insert SONICflex crown extension 020 n° 90

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :
tracé d'arcade asymétrique
Sourire gingival
Atteinte de l'espace biologique

Forme : petit, droit, surface extérieure diamantée (D 46)



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3001
1.011.3002

Insert SONICflex crown extension 020 n° 92

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :
tracé d'arcade asymétrique
Sourire gingival
Atteinte de l'espace biologique

Forme : petit, oblique, surface extérieure diamantée(D 46)



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3005
1.011.3006

Insert SONICflex crown extension 020 n° 91

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :
tracé d'arcade asymétrique
Sourire gingival
Atteinte de l'espace biologique

Forme : petit, oblique, surface extérieure diamantée (D 46)



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3003
1.011.3004

Insert SONICflex crown extension 030 n° 93

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :
tracé d'arcade asymétrique
Sourire gingival
Atteinte de l'espace biologique

Forme : grand, droit, surface extérieure diamantée (D 46)



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3007
1.011.3008

Chirurgie

Insert SONICflex crown extension 030 n° 94

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :
 tracé d'arcade asymétrique
 Sourire gingival
 Atteinte de l'espace biologique

Forme : grand, oblique, surface extérieure diamantée (D 46)




N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3009
 1.011.3010

Insert SONICflex crown extension 030 n° 95

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :
 tracé d'arcade asymétrique
 Sourire gingival
 Atteinte de l'espace biologique

Forme : petit, oblique, surface extérieure diamantée (D 46)

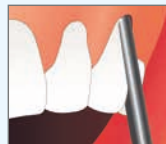

N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3011
 1.011.3012

Insert SONICflex bone n° 80

Traitement : Séparation des fibres de Sharpey. Élargissement de l'alvéole : retrait de résidus de racines ; extraction en douceur avant implantation ; section d'os

Forme : carrée, tranchante




N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3875
 1.006.2006

Insert SONICflex bone n° 81

Traitement : Préparation de la fenêtre osseuse pour le sinus lift. En cas d'os très massifs, séparer la substance corticale par une rotation et enlever l'os restant avec l'insert diamanté

Forme : bille, grande, diamantation D 46

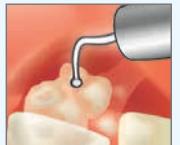

N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3876
 1.006.2008

Insert SONICflex bone n° 83

Traitement : prélèvement de blocs d'os, ostéotomies (distraction, section d'os). En cas de substance corticale extrêmement épaisse, travailler au préalable de manière rotative le cas échéant

Forme : scie sagittale



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3878
 1.006.2012

Chirurgie

Insert SONICflex bone n° 84

Traitement : prélèvement de blocs d'os, ostéotomies (distraction, section d'os). En cas de substance corticale extrêmement épaisse, travailler au préalable de manière rotative le cas échéant

Forme : scie axiale



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3879
1.006.2014

Insert SONICflex bone n° 85

Traitement : Idéal pour décoller en toute sécurité la membrane de Schneider lors d'un sinus lift grâce à sa forme de disque

Forme : pied d'éléphant



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.006.0645
1.007.1624

Insert SONICflex bone n° 86

Traitement : Idéal pour un prélèvement rapide et facile de quantités d'os importantes, en particulier pour le sinus lift

Forme : grattoir



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.006.0741
1.007.1625

Insert SONICflex bone n° 87

Traitement : Idéal pour des incisions fines pour détacher les ligaments

Forme : scie axiale, lames de scie remplaçables
épaisseur de la lame de scie : 0,15 mm



N° de commande : adapté à SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adapté à SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
Lame de scie (5 pièces)

1.006.1406
1.007.1627
1.006.1405

Accessoires :



N° de commande : clé dynamométrique

1.000.4887



N° de commande : Cassette stérile

0.411.9101



N° de commande : clé

0.411.0892



N° de commande : pièce intermédiaire pour l'alimentation de liquide médicamenteux pour SONICflex 2003

1.000.6296

pièce intermédiaire pour l'alimentation de liquide médicamenteux pour SONICflex 2008

1.006.5966

Chirurgie

Aperçu des inserts KaVo SONICflex

Mat.-Nr. 1.008.7297 17/10/16 fr. Sous réserve d'éventuelles modifications techniques. Les couleurs rendues sur le catalogue peuvent montrer une légère différence par rapport au teintier. © Copyright KaVo Dental GmbH



Dispositif médical classe IIa/CE0124/Dekra certification GmbH
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation.
Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ce dispositif figurent dans
les résumés caractéristiques des produits disponibles sur le site : www.kavo.fr
Produit non remboursé par les organismes d'Assurance Maladie
Fabricant : KaVo Dental GmbH – Distribution : KaVo Dental SAS, 77185 Lognes



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH. D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1103 · www.kavo.com