



NOUVEAU
COLA LIME

VOCO Profluorid® Varnish

VERNIS AUX FLUORURES POUR LA
DÉSENSIBILISATION DENTAIRE



VOCO Profluorid® Varnish


FORTE EFFICACITÉ

Les dents sensibles sont un problème largement répandu, causant des douleurs temporaires que le patient ne mentionne pas toujours à son praticien. En général, les tubulis dentinaires ouverts sont la cause de ces hypersensibilités. L'objectif du traitement est donc le scellement. Profluorid Varnish est un vernis fluoré pour le traitement des hypersensibilités. Il permet de sceller efficacement les tubulis dentinaires exposés après la préparation de cavités ou en cas de collets sensibles.


Composition et efficacité de VOCO Profluorid® Varnish

Profluorid Varnish est un vernis à base de colophonium avec un taux de sodium de 5 % (correspond à 22.600 ppm de fluorures). La combinaison des ions de fluor avec des ions de calcium, déposés dans les tubulis, permet une précipitation des fluorures de calcium, scellant les tubulis de manière sûre. Une enquête des utilisateurs a montré que plus que 85 % des patients n'avaient plus de sensibilité après le premier traitement avec Profluorid Varnish.

En plus du scellement rapide des tubulis dentinaires, Profluorid Varnish provoque la formation de dépôts de fluorures de calcium à la surface de la dent et, à long terme, la formation de fluorapatite, qui protège la dent des attaques d'acides.

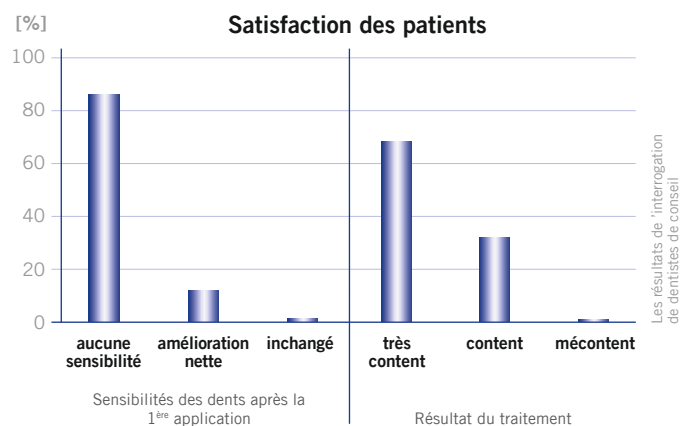

D'autre part, le vernis contient du xylitol qui améliore le goût et qui a un effet cariostatique prouvé.

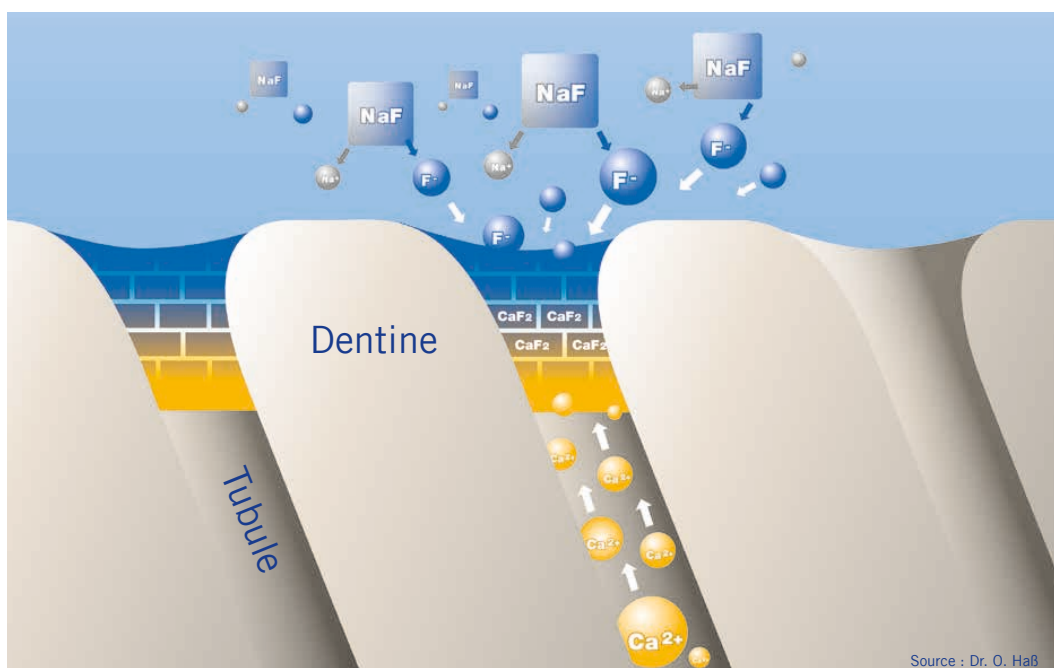

VOCO Profluorid® Varnish


SIMPLE ET ESTHÉTIQUE

Application simple

La matrice de Profluorid Varnish en colophonium permet une bonne adhésion aux surfaces, même aux surfaces humides. Un séchage des surfaces à traiter n'est pas nécessaire ce qui signifie un gain de temps considérable. Ainsi, les patients peu coopérants (par ex. enfants) sont beaucoup plus faciles à traiter.

Esthétique et parfums

Profluorid Varnish est un vernis en teinte de la dent qui n'influence pas l'esthétique. Profluorid Varnish est disponible en six parfums agréables : bubble gum et cerise pour les enfants et les jeunes patients, menthe qui est le parfum classique pour les adultes, caramel dans une version crémeuse, melon au parfum légèrement exotique et la fraîcheur fruitée et pétillante de cola lime. Avec ces six parfums raffinés, vous pouvez proposer des services encore plus individuels à chaque patient.

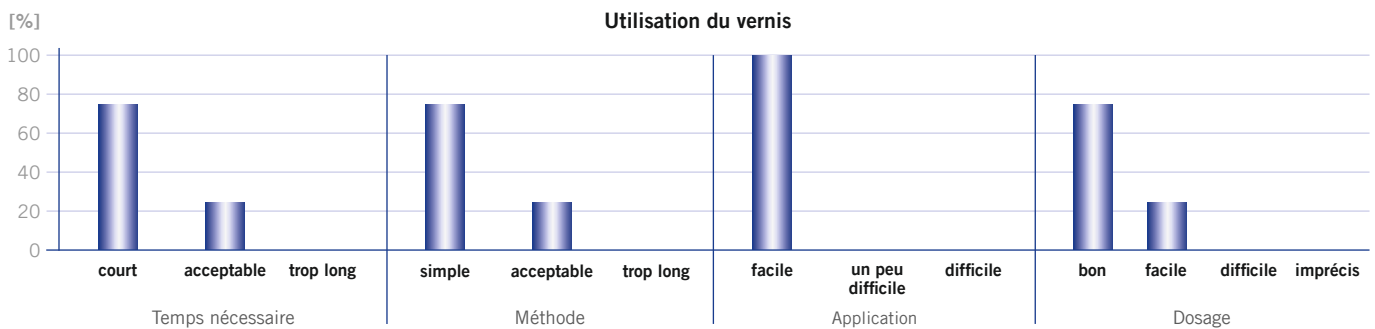

Enquête auprès de dentistes de conseil

L'avis de chirurgiens-dentistes

Tous les chirurgiens-dentistes qui utilisent ce produit confirment la manipulation aisée et l'esthétique de Profluorid Varnish. La plupart des utilisateurs a constaté une différence nette par rapport aux produits de la concurrence. Profluorid Varnish obtient la même appréciation positive chez

les patients. Presque toutes les personnes interrogées confirment la disparition des sensibilités au bout du traitement, ou bien ils constatent une amélioration nette.

Profluorid Varnish : plus qu'une simple question de goût !


Désensibilisation simple et esthétique avec VOCO Profluorid® Varnish



Avantages du SingleDose

- Application facile, rapide et hygiénique
- Utilisation sans outil supplémentaire
- Ne peut se renverser

Application parfaite avec VOCO Profluorid® Varnish – Utilisation de la carapule

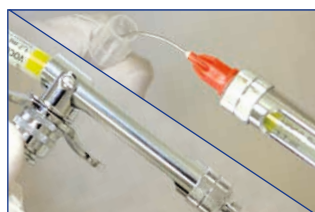

Avantages de la carapule

- Peut être utilisé plusieurs fois par l'emploi de canules jetables
- Application précise
- Utilisation très simple dans la zone proximale
- Application complète des fluorures en un seul trait

VOCO Profluorid® Varnish

VOTRE SÉLECTION

Indications

Traitement de dents hypersensibles
 Traitement de surfaces radiculaires sensibles

Avantages

- Tolère l'humidité
- Vernis esthétique en teinte de la dent
- Désensibilisation rapide et diffusion d'ions de fluor (5 % NaF \triangleq 22.600 ppm fluorures)
- Disponible en six parfums : melon, menthe, cerise, caramel, bubble gum et cola lime
- Application d'une couche fine – très efficace
- Parfaitement apte pour le traitement des collets après le nettoyage et le détartrage
- Idéal en cas d'une MIH hypominéralisation des molaires et des incisives



Présentations

Parfum	SingleDose 48 x 0,40 ml	SingleDose 50 x 0,25 ml	SingleDose 50 x 0,40 ml	SingleDose 200 x 0,40 ml	Tube 10 ml	Tube 50 ml	Tube 4 x 10 ml	Carpule 5 x 1.70 ml
Melon	–	REF 1268	REF 1269	REF 1271	REF 1267	REF 1272	–	REF 2235
Caramel	–	–	REF 2226	REF 2229	REF 2232	–	–	–
Cerise	–	–	REF 2227	REF 2230	REF 2233	–	–	–
Menthe	–	–	REF 2228	REF 2231	REF 2234	–	–	–
Bubble gum	–	–	REF 2238	REF 2239	–	–	–	–
Cola lime	–	–	REF 2240	REF 2241	REF 2236	–	–	–
Mixed	REF 2225*	–	–	–	–	–	REF 2971**	–

REF 2167 Canules d'application type 43, 100 pcs

*8 de chaque : melon, caramel, cerise, menthe, bubble gum, cola lime **4 x 10 ml (melon, caramel, cerise, menthe)

VOCO GmbH
 Anton-Flettner-Straße 1-3
 27472 Cuxhaven
 Allemagne
 Numéro vert: 00 800 44 444 555
 Fax : +49 (0) 4721-719-140
 info@voco.com
 www.voco.dental

Distributeur :