


CABINET DENTAIRE

# Form 3B

Une solution d'impression 3D fiable et abordable dans votre cabinet

Une solution complète d'impression 3D qui permet aux cabinets dentaires de créer des pièces exactes et de qualité constante pour une large gamme de soins.

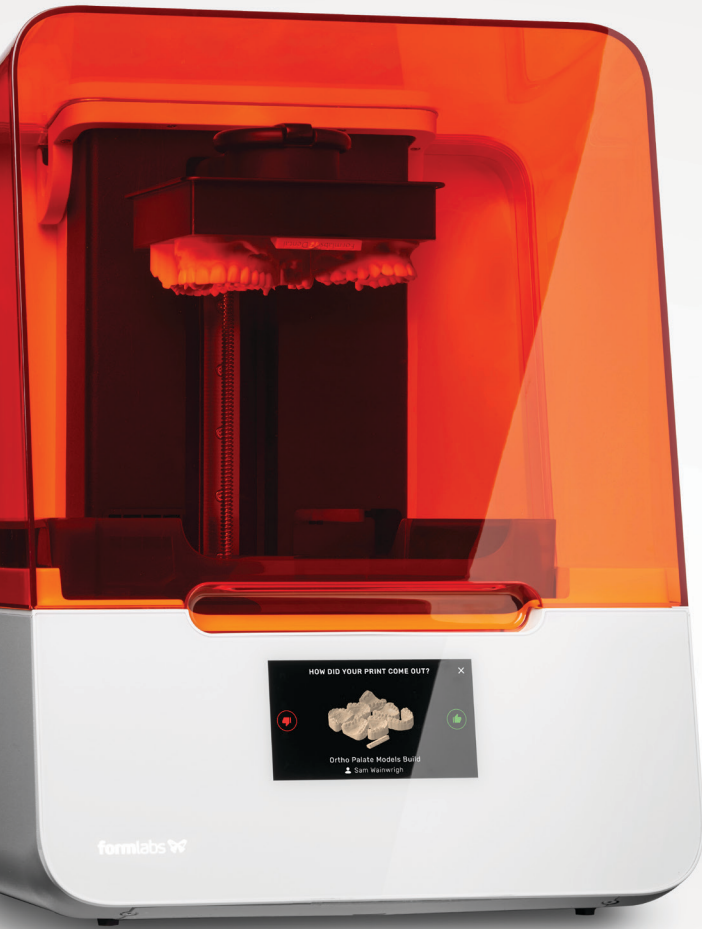


## UN PROCESSUS DE TRAVAIL SIMPLE ET DE QUALITÉ CONSTANTE

Du logiciel aux outils de post-traitement, en passant par la supervision des impressions, Formlabs a développé un processus d'impression simple et intuitif qui convient à tout type de cabinet dentaire.

## VOLUME D'IMPRESSION PLUS IMPORTANT, COÛT RÉDUIT

Imprimez 2 à 3 fois plus de pièces par rapport aux imprimantes DLP de petite taille sur le marché. Gagnez du temps lors de la manipulation de votre imprimante et **de** consacrez-vous à des tâches plus importantes.

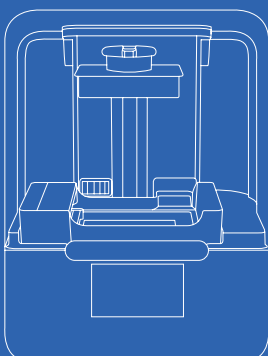

## Caractéristiques techniques de la Form 3B

La nouvelle génération d'impression 3D industrielle

### Technologie

LFS™ Low Force  
Stereolithography

### Épaisseur de couche

25 - 300 microns  
0,001 - 0,012 pouce

### Dimensions

40,5 × 37,5 × 53 cm  
15,9 × 14,8 × 20,9 pouces

### Moteur optique

1 Light Processing Unit  
Puissance du laser :  
250 mW  
Résolution XY :  
25 microns (0,001 pouce)

### Volume d'impression

14,5 × 14,5 × 18,5 cm  
5,7 × 5,7 × 7,3 pouces

### Garantie

Garantie 1 an incluse.  
Extension de garantie  
disponible.

## DENTAL SERVICE PLAN

Formlabs Dental repose sur une équipe de spécialistes dentaires certifiés qui savent exactement comment aider votre entreprise.

Formlabs s'engage à vous accompagner vers le succès grâce à des formations personnalisées, des vérifications proactives des imprimantes et une assistance téléphonique et électronique prioritaire.

formlabs  | dental



### GRANDS MODÈLES POUR DIAGNOSTIC

#### White Resin à 100 µm

Jusqu'à 2 modèles complets (arcades supérieure et inférieure) par impression en 5 heures environ, pour 5 à 8 € par modèle complet



### GRANDS MODÈLES POUR DIAGNOSTIC

#### Model Resin à 100 µm

Jusqu'à 2 modèles complets (arcades supérieure et inférieure) par impression en 5 heures environ, pour 5 à 8 € par modèle complet



### GUIDES CHIRURGICAUX

#### Surgical Guide Resin à 100 µm

Jusqu'à 29 quadrants de guides chirurgicaux par impression en 5 heures environ, pour 0,50 à 2 € par pièce

Jusqu'à 8 arcades de guides chirurgicaux par impression en 4 heures environ, pour 2 à 3,5 € par pièce



### GOUTTIÈRES DENTAIRES

#### Dental LT Clear Resin à 100 µm

Jusqu'à 8 gouttières par impression en 2,5 heures environ, pour 3,50 à 5,50 € par pièce



### MODÈLES DE QUADRANTS POUR PROTHÈSES FIXES

#### Model Resin à 50 µm

Jusqu'à 8 kits de modèles de quadrants (supérieur et inférieur, et die) par impression en 9,5 heures environ, pour 1,75 à 3,50 € par kit



### MODÈLE D'ARCADE COMPLÈTE POUR PROTHÈSES FIXES

#### Model Resin à 50 µm

Jusqu'à 2 kits de modèles d'arcades complètes (supérieure et inférieure, et die) par impression en 9,5 heures environ, pour 5,50 à 7 € par kit

Le coût et les temps d'impression peuvent varier

formlabs  dental

