


ORTHODONTISTE

# Form 3B

Un volume de production continu sur lequel vous pouvez compter

Une solution rapide et facile d'utilisation pour vos cabinets et laboratoires d'orthodontie afin de produire en interne des plaques occlusales et des appareils de maintien, avec un investissement initial réduit.

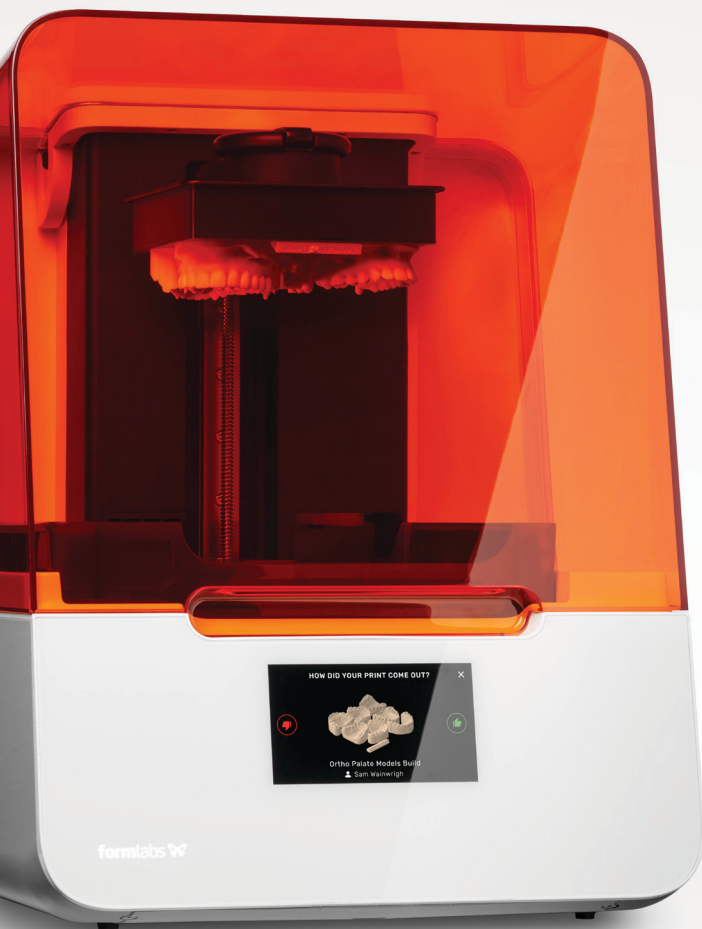


## UN PROCESSUS DE TRAVAIL SIMPLE ET DE QUALITÉ CONSTANTE

Du logiciel aux outils de post-traitement, en passant par la supervision des impressions. Formlabs a développé un processus d'impression simple et intuitif qui convient à tout type de cabinet d'orthodontie.

## UN VOLUME D'IMPRESSION PLUS IMPORTANT À COÛT RÉDUIT

Imprimez 2 à 3 fois plus de pièces par rapport aux imprimantes DLP de petite taille sur le marché. Gagnez du temps lors de la manipulation de votre imprimante et de consacrez-vous à des tâches plus importantes.

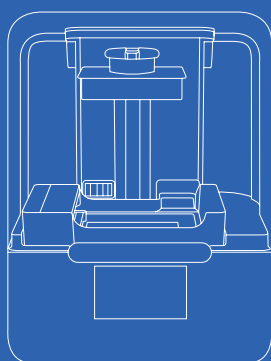

## Caractéristiques techniques de la Form 3B

La nouvelle génération d'impression 3D industrielle

### Technologie

LFS™ Low Force  
Stereolithography

### Épaisseur de couche

25 - 300 microns  
0,001 - 0,012 pouce

### Dimensions

40,5 × 37,5 × 53 cm  
15,9 × 14,8 × 20,9 pouces

### Moteur optique

1 Light Processing Unit  
Puissance du laser :  
250 mW  
Résolution XY :  
25 microns (0,001 pouce)

### Volume d'impression

14,5 × 14,5 × 18,5 cm  
5,7 × 5,7 × 7,3 pouces

### Garantie

Garantie 1 an incluse.  
Extension de garantie  
disponible.

### DENTAL SERVICE PLAN

Formlabs Dental repose sur une équipe de spécialistes dentaires certifiés qui savent exactement comment aider votre entreprise.

Formlabs s'engage à vous accompagner vers le succès grâce à des formations personnalisées, des vérifications proactives des imprimantes et une assistance téléphonique et électronique prioritaire.

formlabs  dental



#### MODÈLES ORTHODONTIQUES À PLAT SUR LA PLATEFORME DE FABRICATION

##### Model Resin à 140 µm

Jusqu'à 9 modèles par impression en 3,5 heures environ, ou un seul en 45 minutes, pour 2 à 3 € par modèle



#### MODÈLES ORTHODONTIQUES À PLAT SUR LA PLATEFORME DE FABRICATION

##### Grey Resin à 160 µm

Jusqu'à 9 modèles par impression en 3,5 heures environ, ou un seul en 45 minutes, pour 2 à 3 € par modèle



#### MODÈLES ORTHODONTIQUES PRATIQUEMENT VERTICAUX

##### Model Resin à 140 µm

Jusqu'à 16 modèles par impression en 8 heures environ, pour 2 à 3 € par modèle



#### MODÈLES ORTHODONTIQUES PRATIQUEMENT VERTICAUX

##### Grey Resin à 160 µm

Jusqu'à 16 modèles par impression en 8 heures environ, pour 2 à 3 € par modèle



#### MODÈLES ORTHODONTIQUES AVEC PALAIS

##### Model Resin à 140 µm

Jusqu'à 7 modèles par impression en 5 heures environ, pour 2,50 à 3,50 € par modèle



#### MODÈLES ORTHODONTIQUES AVEC PALAIS

##### Grey Resin à 160 µm

Jusqu'à 7 modèles par impression en 5 heures environ, pour 2,50 à 3,50 € par modèle



#### GRANDS MODÈLES POUR DIAGNOSTIC

##### White Resin à 100 µm

Jusqu'à 2 modèles complets (arcades supérieure et inférieure) par impression en 5 heures environ, pour 5 à 8 € par modèle complet



#### GRANDS MODÈLES POUR DIAGNOSTIC

##### Model Resin à 160 µm

Jusqu'à 2 modèles complets (arcades supérieure et inférieure) par impression en 5 heures environ, pour 5 à 8 € par modèle complet



#### MODÈLES ORTHODONTIQUES À PLAT SUR LA PLATEFORME DE FABRICATION

##### Draft Resin à 300 µm

Jusqu'à 9 modèles par impression en 1,5 heures environ, ou un seul en 20 minutes environ, pour 2 à 3 € par modèle