

Endy 7 | le micromoteur avec localisateur d'apex

GARANTIE
3 ANS



VOUS RECHERCHER UN APPAREIL EFFICACE, COMBINANT À LA FOIS UN MICROMOTEUR ET UN LOCALISATEUR D'APEX ?

Avec l'Endy 7, profitez d'une solution conçue spécialement pour répondre à vos besoins

une mesure 100% numérique

Le **signal** émit par votre Endy 7 est **100% numérique**. Il n'y a pas de dérive ou de modification de la précision de votre localisateur d'apex IONYX dans le temps.

un capteur interne isolé dans le contre-angle

Dès l'insertion de votre lime dans le contre-angle, le **capteur de mesure est automatiquement connecté**. Le contre-angle en Peek vous garantit une **parfaite isolation du signal de mesure**.

une vitesse et un couple constants

La **vitesse** de l'Endy 7 reste **constante quelque soit l'effort de la lime dans le canal**. Elle ne varie pas, même si la batterie est déchargée à plus de 50%. Le **couple est contrôlé en permanence pour préserver vos limes**.

VOTRE PARTENAIRE DEPUIS + DE 25 ANS

Créée en 1993 et implantée en France en région bordelaise, la société **IONYX conçoit et fabrique des machines spécialisées en endodontie**. Destinée aux omnipraticiens soucieux d'améliorer la qualité de leurs traitements ainsi que leur confort, **toute la gamme IONYX est pensée pour une pratique quotidienne et facile**.

Présent partout dans le monde grâce à son large réseau de distributeurs, **IONYX est l'un des spécialistes les plus reconnus dans le domaine du dentaire**.



Endy 7

micromoteur avec localisateur d'apex

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

une mesure instantanée

La mesure instantanée vous permet d'obtenir l'information de la position de votre lime dès son contact dans le canal.

un arrêt rapide du moteur

Dès que le couple programmé est atteint, le moteur s'arrête rapidement grâce à un blocage électronique qui permet de limiter le risque de fracture de l'instrument.

une plage de vitesse adaptée aux limes canalaires

L'Endy 7 vous permet de régler la vitesse pour votre lime de 100 à 800 tours par minute.

un retour à vitesse lente

Technologie utilisée par IONYX depuis 1996, le retour à vitesse lente d'1 seconde vous permet de dégager l'instrument sans refouler de débris dentinaires vers l'apex.

9 mémoires


L'Endy 7 possède 9 mémoires vous permettant de programmer autant de couples et vitesses adaptés pour chaque lime utilisée. Sa programmation est simple et intuitive.

grande autonomie

L'Endy 7 vous permet de travailler en autonomie durant 1 heure avec un couple moyen de 1,5N.cm. (40 traitements canalaires en moyenne constatés).

chargeur rapide

Son chargeur rapide permet de recharger complètement votre batterie en 2 heures. Afin de préserver celle-ci, la charge se coupe automatiquement dès qu'elle est à son maximum.

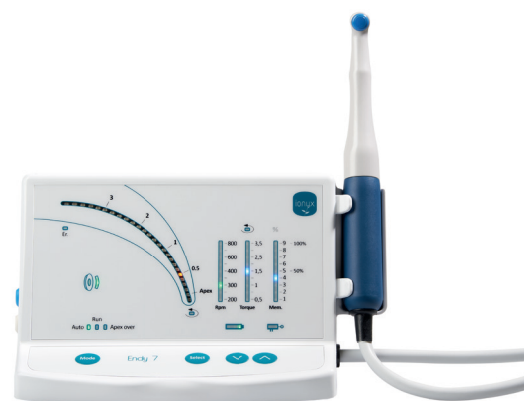

Le boîtier électronique de l'Endy 7 est garanti 3 ans. Le contre-angle, la batterie et les accessoires sont garantis 2 ans.

DÉCOUVREZ LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME ionyx



Locapex 6
localisateur d'apex
conçu par ionyx

Endy NT2
micromoteur
avec lumière intégrée



UN RÉEL PROGRÈS EN PRATIQUE ENDODONTIQUE

ionyx

34 rue de Fleurenne, F-33290 BLANQUEFORT
T. +33 5 56 35 34 27 / F. +33 5 56 95 16 20

ionyx@ionyx.eu
www.ionyx.eu

Suivez nos actualités en direct :

