


elite HD+

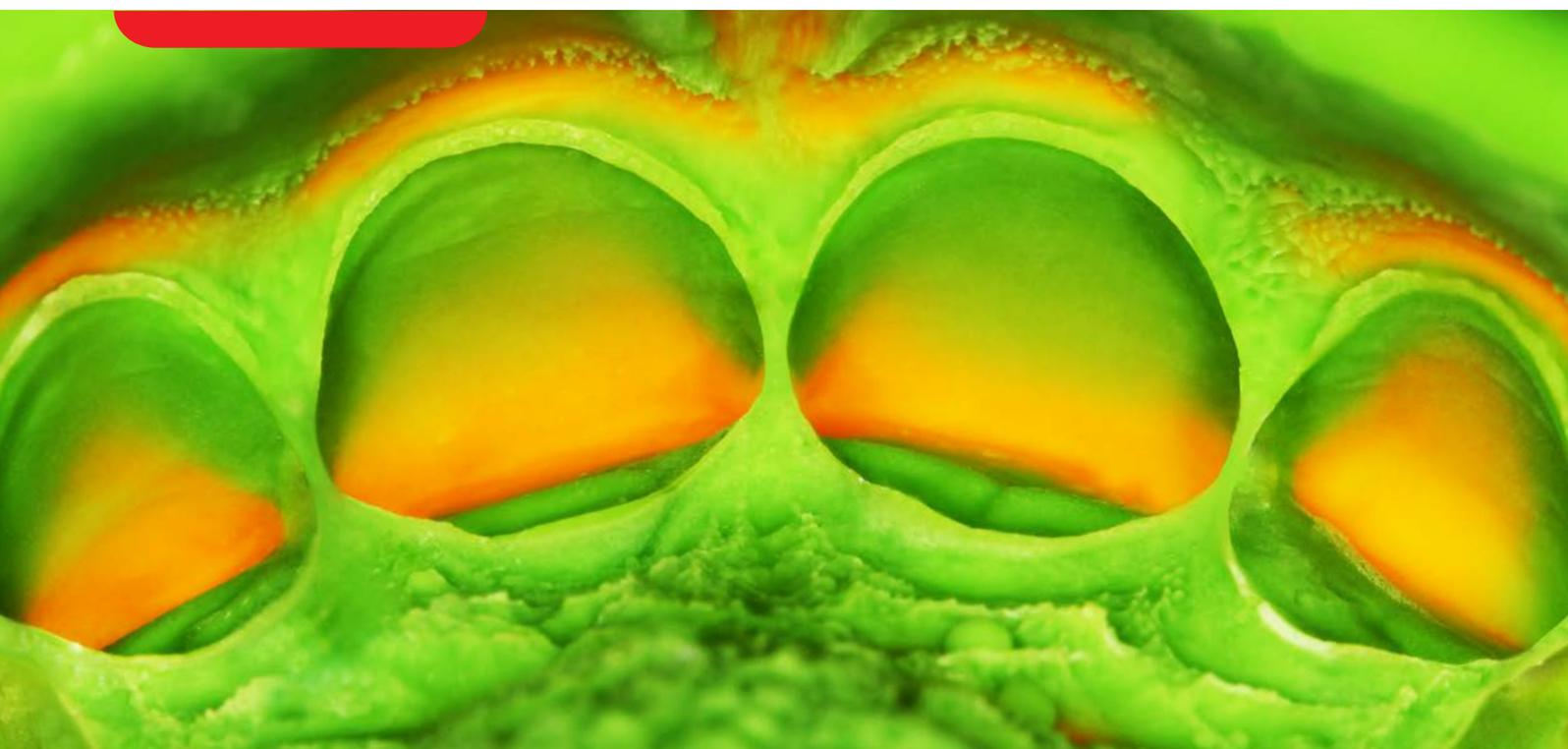

THE HIGH DEFINITION

Silicone A pour la prise d'empreinte


Zhermack 
Dental



Elite HD+,
the high definition


Elite HD+, le silicone A qui offre des résultats précis et fiables.

EliteHD+ est un matériau d'empreinte qui concilie les effets innovants de la **nanotechnologie** et de l'**hydrocompatibilité** afin de garantir des performances élevées dans différentes conditions cliniques.

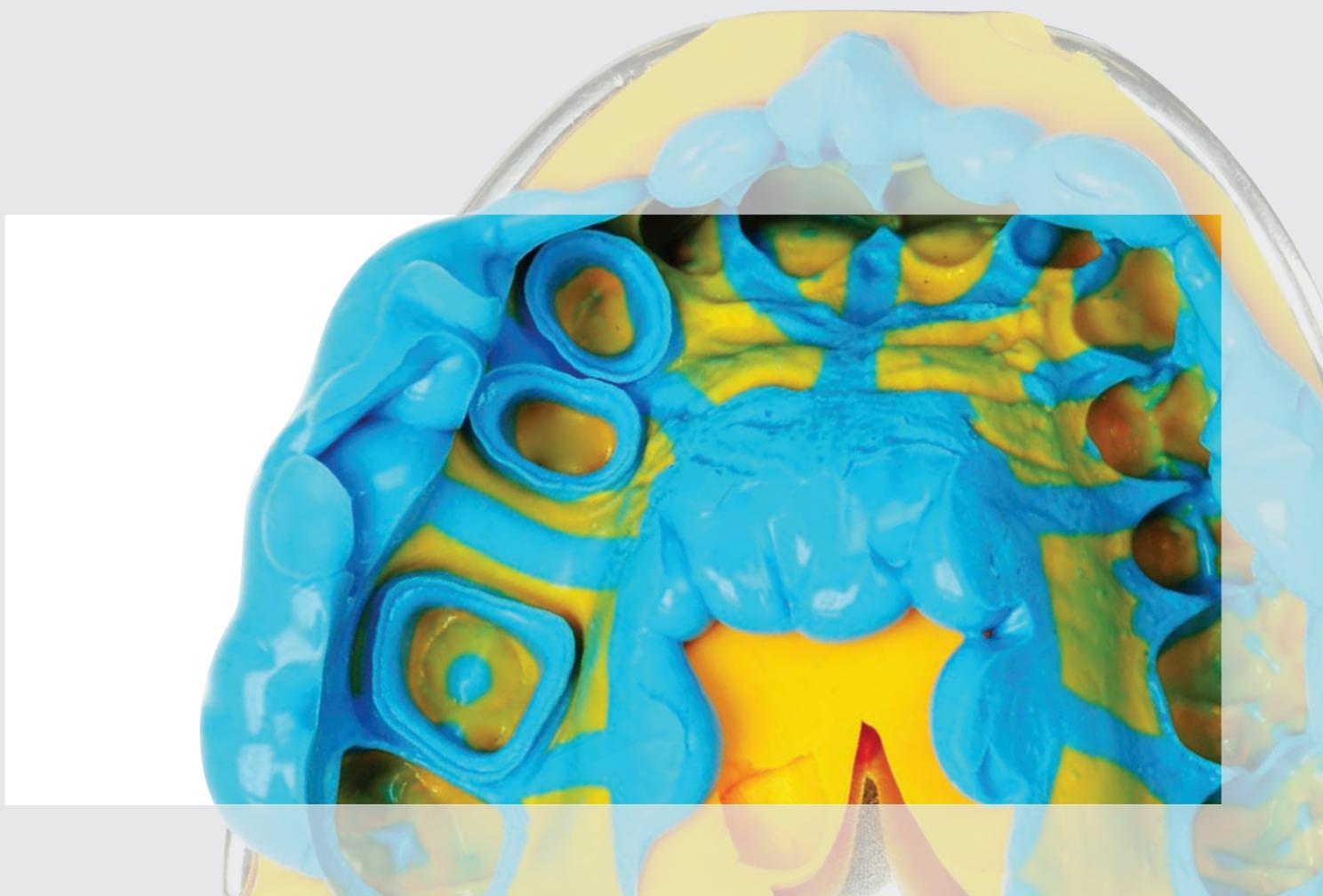

Caractéristiques

Quand l'hydrocompatibilité devient définition.

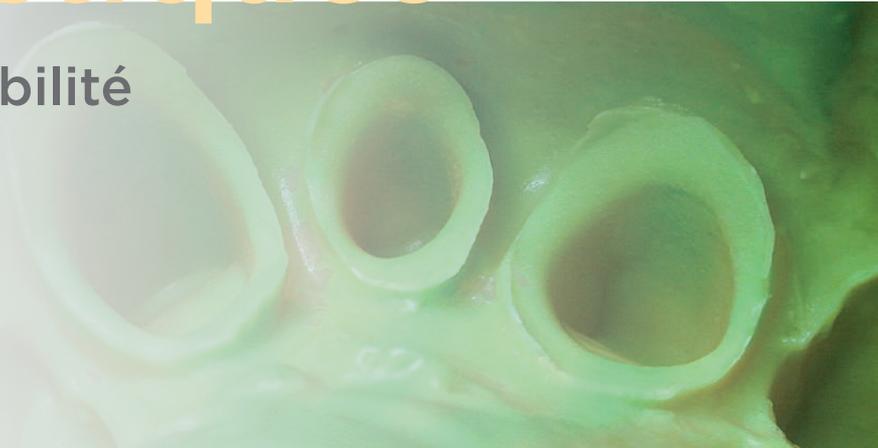

HYDROCOMPATIBLE

- ▶ **Hydrocompatibilité** rapide pour une expérience utilisateur optimale.

FLUIDE

- ▶ **Nanoparticules** intégrées dans le produit augmentent la fluidité du matériau d'empreinte près du sulcus gingivale.

PRECIS

- ▶ L'**action synergique** entre hydrocompatibilité immédiate et nanotechnologie permet une reproduction fidèle de détail.

VERSATILE

- ▶ Une **large gamme** de viscosité et temps d'utilisation adaptée à n'importe quelle technique d'empreinte.

PRATIQUE

- ▶ Le **système 5:1** pour mélangeur automatique ne nécessite pas d'adaptateur et il est fourni avec un système d'**attache rapide** de l'embout-mélangeur.

COMPLET

- ▶ Une gamme de produits qui satisfait les **différentes exigences cliniques de l'utilisateur.**

Avantages

Hydrocompatibilité et nanotechnologie, un choix synergique.


HAUTE DÉFINITION

L'**effet de l'hydrocompatibilité** permet de relever rapidement n'importe quel détail en réduisant sensiblement le risque de formation de bulles.

PRESSION DES FLUX

L'**effet de la nanotechnologie** se manifeste également lorsque le matériel est soumis à une pression pendant la prise d'empreinte. À ce moment Elite HD+ augmente la fluidité pour atteindre les espaces les moins accessibles.


DROP TEST

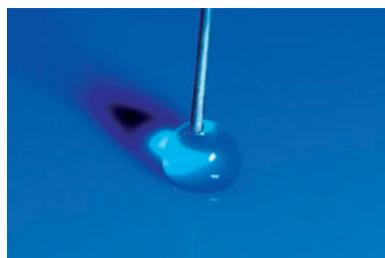

GOUTTE APRÈS 2 SECONDES



Silicone conventionnel

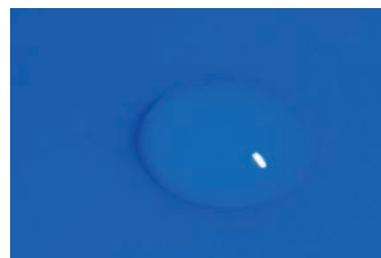


Elite HD+

Techniques d'empreinte

Techniques et combinaisons suggérées



PRODUIT	TECHNIQUE SUGGÉRÉE	COMBINAISON SUGGÉRÉE
Elite HD+ Putty Soft Elite HD+ Maxi Putty Soft	Empreinte à deux étapes	Elite HD+ Regular Body Elite HD+ Light Body Elite HD+ Super Light Body
Elite HD+ Tray Material Elite HD+ Maxi Tray Material	Empreinte simultanée	Elite HD+ Regular Body Elite HD+ Light Body
Elite HD+ Monophase Elite HD+ Maxi Monophase	Empreinte en un seule étape	

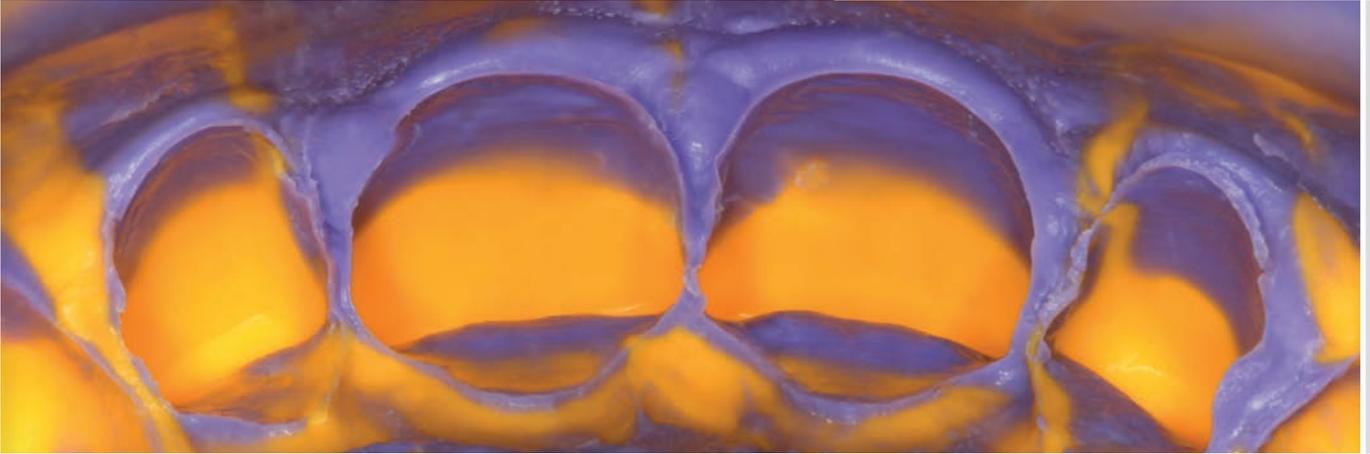

HYDROCOMPATIBILITÉ

La **combinaison des charges nanométriques**, prétraitées avec des tensioactifs polaires, rend **Elite HD+** rapidement hydrocompatible après l'application du fluide au sein du sillon gingival.


FLUIDITÉ IDÉALE

L'**application de nanoparticules** permet à Elite HD+ d'atteindre une fluidité idéale en correspondance des sillons gingivaux.

DÉTAILS DE L'EMPREINTE



Regular Body Normal Setting

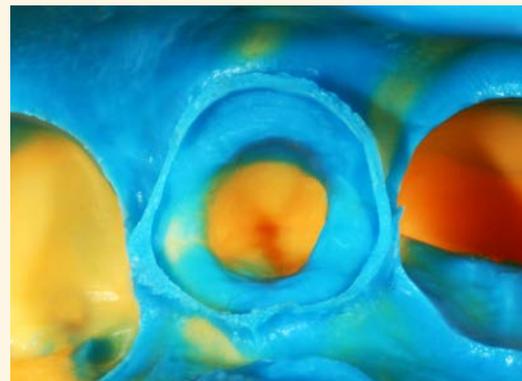

Light Body Normal Setting

Conditionnement



Elite HD+ Putty Soft - Silicone A à très haute viscosité

Code	Temps de prise	Emballage
C203000	Normal Set	Standard pack : 250 ml Base + 250 ml tubes catalyseurs
C203010	Fast Set	
C203002	Normal Set	Emballage économique : 2 x 450 ml Base + 2 x 450 ml tubes catalyseur
C203012	Fast Set	
C203100	Normal Set	Intro Kit : 250 ml Base + 250 ml tubes catalyseur Putty Soft Normal, 1 x 50 ml Light Normal, 1 x 50 ml Normal Regular + 12 embouts de mélange jaunes + 6 embouts intra-oraux + 1 distributeur D2



NORMAL FAST

Elite HD+ Maxi Putty Soft - Silicone A à très haute viscosité

Code	Temps de prise	Emballage
C202340	Normal Set	Standard pack : 2 cartouches de 380 ml (Base + catalyseur) + 15 embouts de mélange dynamique-statiques + 2 protections d'embout de mélange
C202360	Fast Set	
C202350	Normal Set	Emballage économique : 6 cartouches de 380 ml (Base + catalyseur) + 2 protections d'embout de mélange
C202370	Fast Set	



NORMAL **5:1** FAST

Elite HD+ Tray Material - Silicone A à haute viscosité

Code	Temps de prise	Emballage
C202032	Fast Set	Standard pack : 2 cartouches de 50 ml (Base + catalyseur) + 6 embouts de mélange verts



Elite HD+ Maxi Tray Material - Silicone A à haute viscosité

Code	Temps de prise	Emballage
C202320	Fast Set	Standard pack : 2 cartouches de 380 ml (Base + catalyseur) + 15 embouts de mélange dynamique-statiques + 2 protections d'embout de mélange
C202330	Fast Set	Emballage économique : 6 cartouches de 380 ml (Base + catalyseur) + 2 protections d'embout de mélange



5:1

Elite HD+ Monophasé - Silicone A à viscosité moyenne

Code	Temps de prise	Emballage
C202020	Normal Set	Standard pack : 2 cartouches de 50 ml (Base + catalyseur) + 12 embouts de mélange jaunes



Elite HD+ Maxi Monophase - Silicone A à viscosité moyenne



5:1

Code	Temps de prise	Emballage
C202300	Normal Set	Standard pack: 2 cartouches de 380 ml (base + catalyseur) + 15 embouts de mélange dynamique-statiques + 2 protections d'embout de mélange + 15 embouts intra-oraux
C202310	Normal Set	Emballage économique: 6 x 380 ml cartouches (Base + catalyseur) + 2 protections d'embout de mélange

Elite HD+ Regular Body - Silicone A à viscosité moyenne



Code	Temps de prise	Emballage
C203020	Normal Set	Standard pack: 2 cartouches de 50 ml (Base + catalyseur) + 12 embouts de mélange jaunes
C203025	Normal Set	Standard pack: 2 tubes x 90 ml (Base + catalyseur)
C203100	Normal Set	Kit Intro: 250 ml Base + 250 ml tubes catalyseur Putty Soft Normal, 1 x 50 ml Light Normal, 1 x 50 ml Normal Regular + 12 embouts de mélange jaunes + 6 embouts intra-oraux + 1 distributeur D2

Elite HD+ Light Body - Silicone A à faible viscosité



Code	Temps de prise	Emballage
C203030	Normal Set	Standard pack: 2 cartouches de 50 ml (Base + catalyseur) + 12 embouts de mélange jaunes
C203035	Normal Set	Standard pack: 2 tubes x 90 ml (Base + catalyseur)
C203100	Normal Set	Intro Kit: 250 ml Base + 250 ml tubes catalyseur Putty Soft Normal, 1 x 50 ml Light Normal, 1 x 50 ml Normal Regular + 12 embouts de mélange jaunes + 6 embouts intra-oraux + 1 Distributeur D2

Elite HD+ Light Body - Silicone A à faible viscosité



Code	Temps de prise	Emballage
C203040	Fast Set	Standard pack: 2 cartouches de 50 ml (Base + catalyseur) + 12 embouts de mélange jaunes

Elite HD+ Super Light Body - Silicone A à faible viscosité



Code	Temps de prise	Emballage
C203050	Fast Set	Standard pack: 2 cartouches de 50 ml (Base + catalyseur) + 12 embouts de mélange jaunes



Appareils

Code	Modèle
6000-0000	Sympress – 230 V
6000-1000	Sympress – 120 V
6000-2000	Sympress 230 V prise Royaume-Uni
6000-3000	Sympress 100 V

Voir la liste complète des accessoires Sympress sur le site www.zhermack.com

Accessoires

C202070



Embouts pour mélange jaunes (48 pièces)

C202080



Green mixing tips (48 pcs)

C202090



Yellow oral tips (48 pcs)

C700025




Universal Tray Adhesive - bottle 10 ml

C202100



D2 Dispenser 1:1

C205530

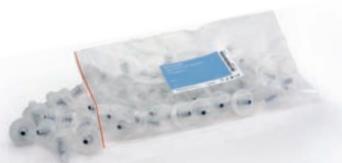

Dynamic-static mixing tips (50 pcs)

C205540



Mixing tip lockers (2 pcs)

D510010



Putty Cut

C207202



Mixing pad (12 sheets)

C207200



Spatula for silicones



Fulfilling your needs