

Quelles utilisations d'Unifast III pour votre pratique ?



Couronnes provisoires




Bridge sur implant

Laboratoire Dentaire Xavier Laly, Paris, France



Bridges provisoires

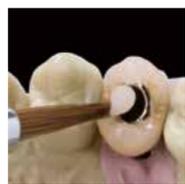

Fermer des ouvertures de
fixation d'implant


Labo Andriessens, Bruxelles, Belgique



Inlays provisoires



Réparation de prothèse

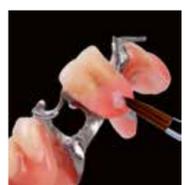

Reproduction gingivale



Prothèse avec attachement

CEKA / PRECH-LINE attachements



Unifast III		
Intro Pack, 2-1pkg, A2-A3		
A1, Poudre 35g	A1, Poudre 100g	
A2, Poudre 35g	A2, Poudre 100g	A2, Poudre 300g
A3, Poudre 35g	A3, Poudre 100g	A3, Poudre 300g
A3.5, Poudre 35g	A3.5, Poudre 100g	
B2, Poudre 35g	B2, Poudre 100g	
E3, Poudre 35g	E3, Poudre 100g	
Incisal, Poudre 35g	Incisal, Poudre 100g	Incisal, Poudre 300g
Clear, Poudre 35g	Clear, Poudre 100g	
No.3 (Rose), Poudre 35g	No.3 (Rose), Poudre 100g	
No.8 (Rose veiné), Poudre 35g	No.8 (Rose veiné), Poudre 100g	No.8 (Rose veiné), Poudre 300g
Liquide 40g (42ml)	Liquide 100g (104ml)	Liquide 250g (260ml)
Organisateur plastique	Godet de mélange jetable (50) No. 2	Pinceau No. 10



Optiglaze
Vernis protecteur nano-
chargé photopolymérisable

Liquide de 15 ml



G-Coat PLUS
Traitement de surface auto-adhésif
nanochargé photopolymérisable

Liquide de 4 ml, 20 coupelles jetables,
50 micro-embouts & 1 applicateur



Metal Primer II
Adhésif pour collage
d'acryliques dentaire et
de composites aux
métaux

Liquide de 5 ml,
1 pinceau

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC Europe NV
Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
http://benelux.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Bergstrasse 31c
CH-8890 Flums
Tel. +41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info.switzerland@gc.dental
http://switzerland.gceurope.com

'GC.'

z O LF FR 6 61 02/2019

'GC.'

Un matériau
haut de gamme,
pour les plus grands
chefs-d'oeuvre.
Unifast III de GC.

Une résine acrylique auto-polymérisable pour les provisoires
à long terme : bridges, inlays et réparations.
Une solution rentable pour une esthétique au sommet.

Résine acrylique auto-polymérisable, couronnes, bridges et inlays provisoires ainsi que les réparations.

Unifast, produit extrêmement populaire né d'une pensée novatrice il y a plus de 30 ans, dévoile aujourd'hui une nouvelle génération.

Unifast III – **introduit la Technologie SURF**, une nouvelle et **révolutionnaire technologie de traitement des polymères**. Manipulation, propriétés physiques et esthétiques ont atteint des niveaux au-delà de toute attente pour ce type de matériau.


SURF technologie

Technologie Révolutionnaire de Fixation et Uniformité de Surface (SURF)

Cette nouvelle technologie a permis à GC d'établir une composition parfaitement équilibrée : **une adaptabilité, une résistance à l'usure et à la flexion...** sans charges ajoutées : seul moyen, jusqu'à présent, d'augmenter la solidité et la résistance à l'usure. Or, une partie des charges restait inerte, incapable de se lier à la matrice résineuse et donnant un résultat moins esthétique.

En développant cette nouvelle technologie SURF de traitement des polymères, GC a non seulement surmonté les limites esthétiques, mais a créé une résine **très résistante à la décoloration**. Grâce à la technologie SURF et pour la première fois, les particules de polymère sont recouvertes de pigment. Cela permet de distribuer uniformément les particules de polymère et de pigment et de garantir ainsi **un mélange sans bulle et d'une teinte exceptionnelle**. Unifast III assure la solidité à long terme, mais aussi la tenue de la teinte. Ceci combiné à des propriétés physiques supérieures, en font un matériau de choix pour les provisoires sur implants à long terme...

Technologie conventionnelle

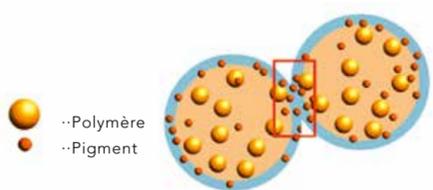


Les pigments s'agglutinent sur les bords causant une ligne de démarcation.



Echantillons :

Les échantillons ont été réalisés selon la technique de montage au pinceau et observés par transmission de la lumière. Avec la technologie conventionnelle, une couleur inégale est observée à la limite de chaque application au pinceau, tandis qu'Unifast III montre une homogénéité de la couleur exceptionnelle.

Unifast III Technologie SURF

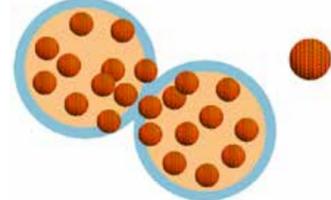

Les polymères sont enduits de pigments, permettant un mélange parfaitement homogène.



..Polymère
(Technologie SURF)

Manipulation supérieure pour les deux techniques : mélange et montage au pinceau.

Mélange & coulée

Extrêmement faciles à mélanger avec le liquide, les poudres Unifast III permettent d'obtenir un mélange non collant.

Une **consistance idéale pour un travail confortable et une prise rapide** qui améliorent considérablement sa manipulation.



Montage au pinceau

Unifast III est idéal pour des restaurations temporaires simples et rapides d'une seule teinte ou pour des restaurations provisoires esthétiques à long terme (montage par stratification).

Plonger simplement le pinceau dans le liquide puis dans la poudre. Grâce à **ses propriétés de thixotropie optimales**, vous pouvez réaliser des restaurations provisoires étape par étape comme vous le souhaitez. **La fluidité est adaptable** selon le moment de l'application.



ZTM Bernd van der Heyd, Allemagne



Mise en place immédiate après avoir trempé le pinceau ... Fluidité ELEVÉE



Application au pinceau après une courte pause ... fluidité plus BASSE



Une gamme de teintes

Avec Unifast III, les restaurations temporaires permettent **un aperçu clair et précis de la restauration finale**. Les patients attachent une importance accrue à ce service ; ils se sentent plus à l'aise avec ce procédé. Mieux encore : une relation de confiance patient/professionnel s'établit.



Pour répondre à la demande du marché, Unifast III propose **une large gamme de teintes**. Unifast III est disponible en plusieurs teintes Dentine Vita* avec des teintes Email et Incisale ayant **une translucidité optimale** qui s'adaptent à la dent naturelle pour tous les cas clinique nécessitant une esthétique élevée. Des teintes plus claires sont également disponibles pour les patients aux dents blanchies.

La force de la technologie SURF réside dans le fait que les teintes claires ne se décolorent pas dans le temps. Ce qui est parfait pour les procédures comme les attelles qui ne doivent pas être visibles, ou pour mettre l'accent sur les nuances dans **la technique de stratification**. Les teintes « rose » sont conçues pour les réparations des prothèses.

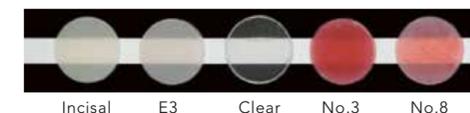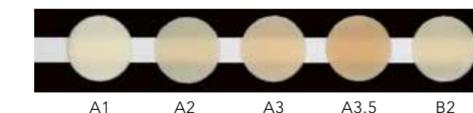

Gain de temps

Pour finir en beauté, le **verniss Optiglaze**, récemment développé par GC, apporte la touche finale à cette technique rapide et facile. Il offre une surface esthétique brillante à toutes les restaurations indirectes.

Ainsi, à la place du polissage (utilisation de fraise, pâte de polissage) fastidieux appliquez simplement le vernis au pinceau après la finition. Photopolymérisez seulement 3 minutes dans une unité lumineuse.

Ce nouveau vernis vous apporte **une surface esthétique brillante** dont le résultat est similaire au polissage final.



ZTM Bernd van der Heyd, Allemagne

Facile à utiliser, facile à conserver et sans risque pour l'environnement.

L'organisateur en plastique contient des flacons rechargeables de poudre et liquide. Tous les composants ont été développés dans le respect des normes écologiques - de la production au transport jusqu'à l'utilisation finale...



* Vita® est une marque déposée de Vita® -Zahnfabrik Bad Säckingen, Allemagne.