



Varios
iPiezo engine®



Puissance, Performance & Multifonction



iPiezo engine Varios 970

LEO

MSK Varios 2 Lux



Varios

iPiezo engine®

Suivez Votre Intuition

Grâce à la Technologie iPiezo NSK, la nouvelle gamme Varios vous offre plus d'efficacité dans les traitements ainsi que dans les diverses applications cliniques.

En association avec une large gamme d'inserts, les applications sont sans fin : Endodontie, Parodontie, Détartrage et Maintenance. Le double éclairage LED situé à l'extrémité de la pièce à main effilée assure une visibilité optimale et permet un traitement plus précis notamment dans les procédures de détartrage.

Varios2 Pièces à main



Performances hors du commun

Avec un poids de seulement 33 g et grâce à leurs ergonomies, les pièces à main vous offrent des performances exceptionnelles réduisant ainsi la fatigue, même pendant des traitements prolongés. Le double éclairage LED assure une visibilité excellente, dénuée de toute ombre, améliorant notablement les conditions de travail.

Avantages :

- Une pièce à main avec éclairage LED, plus légère et plus fine
- La technologie iPiezo garantit une juste puissance à chaque instant
- Un double éclairage LED via barreau de quartz
- Des pièces à main disponibles avec ou sans lumière
- Une large gamme d'inserts pour une grande variété d'applications



Equilibre, Ergonomie, Eclairage LED

L'utilisation de cette nouvelle pièce à main garantit un accès aisé, une visibilité optimale sur le champ opératoire et une utilisation plus confortable, donc moins fatigante. La pièce à main peut être stérilisée en autoclave jusqu'à 135°C et peut être thermo-désinfectée.



Pièce à main Varios2 Lux



Concurrent



Lumière



Non lumière



L'éclairage LED offre une lumière semblable à la lumière du jour, ce qui améliore considérablement votre qualité de travail

Double éclairage LED **Visibilité** : Les LED diffusent une lumière de qualité équivalente à la lumière du jour, ce qui assure une vision plus nette comparativement aux ampoules halogènes.

Longévité : Les ampoules LED ont une durée de vie plus longue que les ampoules halogènes.



Lavables en thermodésinfecteur



Stérilisation en autoclave jusqu'à 135°C

Varios 970

iPiezo engine®

Lumière / Non lumière

Moteur multifonction

Une nouvelle conception « Tout-En-Un » pour diverses applications : Endodontie, Parodontie, Détartrage et Maintenance. Les 2 flacons de 400 ml qui peuvent contenir des solutions différentes sont commandés par 2 pompes indépendantes. Les qualités du nouveau Varios 970 sont le fruit de cette nouvelle technologie iPiezo qui assure une efficacité maximale en contrôlant automatiquement la pression exercée au niveau de l'insert.



Grand écran LED

Tous les paramètres sont clairement affichés sur le grand écran LED contrôlé par des boutons judicieusement reconnaissables.



iPiezo engine®

Fonction Feedback

La technologie iPiezo délivre la puissance adéquate au niveau de l'insert en fonction des conditions rencontrées.

Fonction Auto-Tuning

Cette fonction permet d'adapter à chaque instant la fréquence d'oscillation optimale de la pièce à main quelles que soient les conditions rencontrées, garantissant un résultat parfait. Cette technologie garantit une fréquence optimale stable même en cas de dépôt de tartre important.





Flacons facilement interchangeables

Les 2 grands flacons de 400 mL peuvent être rapidement et facilement remplacés. La solution adéquate peut donc être utilisée sans manipulation fastidieuse.



Fonction de Mémorisation

Le débit d'irrigation et la puissance du détartrage peuvent être mémorisés, ce qui permet un gain de temps. En cas de coupure de courant, ces paramètres restent mémorisés.

Un design étudié pour une hygiène parfaite

Ce boîtier tout en courbes a été conçu pour une hygiène rigoureuse.

Irrigation interne/externe

Le Varios 970 permet de sélectionner 2 types d'irrigation : soit les 2 flacons contenant une solution, soit de l'eau en bouteille ou bien de l'eau de ville. Sélectionner le mode irrigation adapté depuis la face avant du boîtier. La LED indique quel mode est en fonction.



Varios 970

Lumière / Non lumière

iPiezo engine®

Une longévité améliorée en présence des solutions antiseptiques

L'introduction de pièces en résine pour les composants de la pompe, des flacons et de la pièce à main assure une solidité et une longévité accrues et réduit considérablement les risques de corrosion dus aux résidus des solutions antiseptiques.

Mode Auto-nettoyage

Après utilisation, le mode Auto-nettoyage nettoie le cordon, la pièce à main et les inserts d'une simple pression sur un bouton. Il permet en outre de nettoyer efficacement et séparément les deux arrivées de liquide.



Sélection du mode d'irrigation

Deux boutons permettent de sélectionner le mode d'irrigation via :


- les flacons,
- l'eau de ville



Pédale de contrôle circulaire 360°

Grâce à sa forme circulaire, la nouvelle pédale du Varios 970 s'utilise sous tous les angles.

MODÈLE : **FC-70**
RÉF : **Z1008001**
• 2.5m cordon

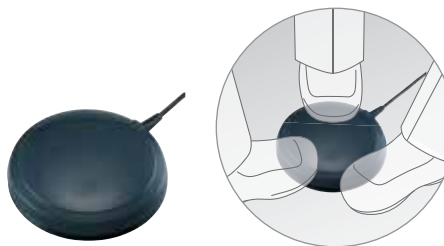

Varios et Boîtier de stérilisation, Clé dynamométrique

Cette cassette a été conçue pour stocker en toute sécurité les différents composants du Varios.



MODÈLE : **Clé dynamométrique**
RÉF : **Z221076**

MODÈLE : **Boîtier de stérilisation**
RÉF : **Z1035001**



Ensemble complet Varios 970



Lumière Ensemble Complet Varios 970

MODÈLE : **VA970 LUX (230V)** RÉF : **Y1001168**

Non-Lumière Ensemble Complet Varios 970

MODÈLE : **VA970 (230V)** RÉF : **Y1001175**

Caractéristiques

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Alimentation | : CA 230V 50/60Hz |
| • Fréquence | : 28 - 32 KHz |
| • Sortie max. | : 11 W (mode G) |
| • Dimensions (avec bouteilles) | : L160 x P260 x H80 mm |
| • Poids du boîtier nu | : 2,2 kg |
| • Volume des flacons | : 400 ml (x 2 flacons) |

Contenu :

- Boîtier de contrôle
- Pièce à main
- Cordon de la pièce à main
- 3 inserts de détartrage (G4, G6, G8)
- Pédale de contrôle (FC-70)
- 2 bouteilles
- 3 clés dynamométriques avec limiteur de couple
- Cordon d'alimentation
- Boîtier de stérilisation

Varios 570

Lumière

iPiezo engine®

Compact et multifonctions

Le Varios 570 offre trois modes de puissances sélectionnables en fonction de l'application souhaitée. "G" (Détartrage), "E" (Endodontie) et "P" (Parodontie). Le niveau de puissance peut être ajusté dans chaque mode. En mode "P", il est possible de limiter la puissance au minimum, indispensable dans certains traitements parodontiques.



Avantages :

- Technologie iPiezo
- Boîtier compact et portable
- Face avant conviviale
- Larges boutons ergonomiques pour un ajustement aisé du débit d'irrigation et de la puissance
- Pièce à main lavable en thermodésinfecteur et stérilisable en autoclave jusqu'à 135°C



Ensemble complet Varios 570



Lumière Ensemble complet Varios 570 Lumière

MODÈLE : **VA570 LUX (230V)** RÉF. : **Y1001273**

Caractéristiques :

- Alimentation : CA 100-240V AC 50/60 Hz
- Fréquence : 28 - 32 KHz
- Sortie Max. : 11 W (mode G)
- Dimensions : L160 x P135 x H65 (mm)
(sans cordon et pièce à main)
- Poids du boîtier : 0.52 kg

Contenu

- Boîtier de contrôle • Pièce à main • Cordon de la pièce à main • 3 inserts de détartrage (G4, G6, G8) • Pédale de contrôle (FC-70)
- Set filtre à eau • Clé dynamométrique avec limiteur de couple • Cordon d'alimentation • Support boîtier

Varios 370

Non lumière

iPiezo engine®

Boîtier de contrôle multifonction compact

Le Varios 370 a été spécialement conçu pour proposer un démarreur portable et compact permettant une installation simple dans tous les units dentaires. Il est facile à utiliser et convient à toutes sortes d'applications cliniques - Modes "P" (Parodontie), "E" (Endodontie) et "G" (Général). Disponible en modèles lumière et non lumière.



Avantages :

- Technologie iPiezo
- Boîtier compact et portable
- Face avant conviviale
- Larges boutons ergonomiques pour un ajustement aisé du débit d'irrigation et de la puissance
- Pièce à main lavable en thermodésinfecteur et stérilisable en autoclave jusqu'à 135°C
- Existe différents supports

Exemples d'installation du Varios 370



Sur le bras de la tablette (support en option)



Sur/sous la tablette avec le support fourni



A l'arrière de la tablette avec la potence spécifique (en option)



Ensemble complet Varios 370



Non-Lumière Ensemble complet Varios 370

MODÈLE : **VA370 (230V)** RÉF. : **Y1001340**

Caractéristiques :


• Alimentation	: CA 100-240V 50/60Hz
• Fréquence	: 28 - 32 KHz
• Sortie max.	: 11 W (mode G)
• Dimensions	: L80 x P115 x H32 mm (sans cordon)
• Poids du boîtier nu	: 0,43 kg

Contenu

- Boîtier de contrôle
- Pièce à main
- Cordon de la pièce à main
- 3 inserts de démartrage (G4, G6, G8)
- Pédale de contrôle (FC-70)
- Set filtre à eau
- Support pièce à main
- Clé dynamométrique avec limiteur de couple
- Cordon d'alimentation
- Support boîtier

Inserts Varios

NSK propose un large choix d'inserts ultrasoniques VARIOS pour différentes applications cliniques

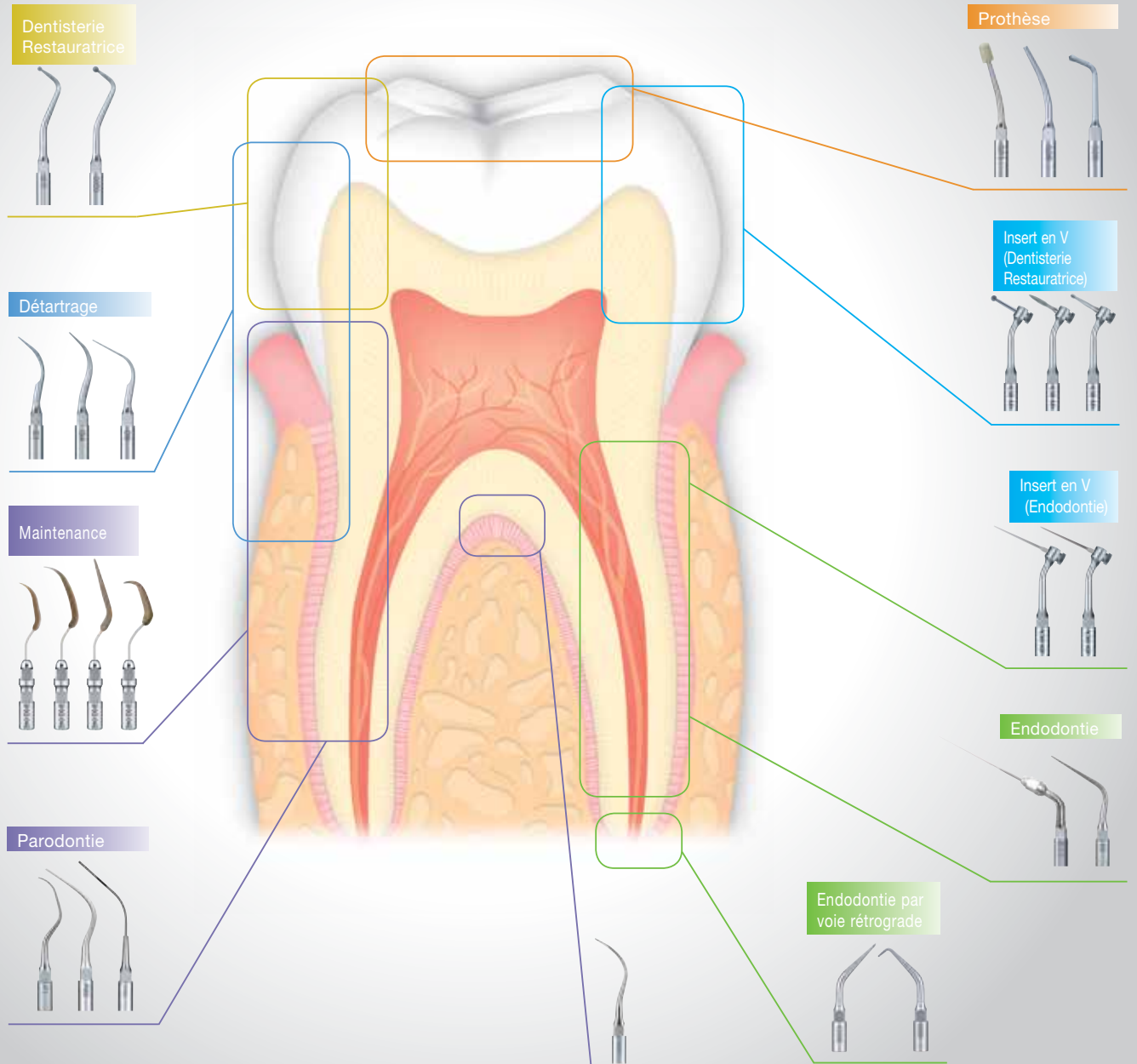

Détartrage

Diagramme en coupe transversale

			MODÈLE : G1	NSK Satelec® REF : Z217101
			MODÈLE : G1-E	EMS® REF : Z291101
			MODÈLE : G2	NSK Satelec® REF : Z217102
			MODÈLE : G2-E	EMS® REF : Z291102
			MODÈLE : G3	NSK Satelec® REF : Z217103
			MODÈLE : G3-E	EMS® REF : Z291103
			MODÈLE : G4	NSK Satelec® REF : Z217104
			MODÈLE : G4-E	EMS® REF : Z291104
			MODÈLE : G5	NSK Satelec® REF : Z217105
			MODÈLE : G6	NSK Satelec® REF : Z217106
			MODÈLE : G6-E	EMS® REF : Z291106
			MODÈLE : G8	NSK Satelec® REF : Z217108
			MODÈLE : G9	NSK Satelec® REF : Z217109
			MODÈLE : G11	NSK Satelec® REF : Z217411
			MODÈLE : G12	NSK Satelec® REF : Z217412
			MODÈLE : G13	NSK Satelec® REF : Z217413



Lavables en thermodésinfecteur





Stérilisation en autoclave jusqu'à 135°C

Parodontie (curetage du cément radicaire)

Diagramme en coupe transversale

			MODÈLE : P1	NSK Satelec® RÉF : Z217404
			MODÈLE : P1D	NSK Satelec® RÉF : Z217405
	 • Diamanté		MODÈLE : P2D	NSK Satelec® RÉF : Z217402
	 (Vue de-dessus) • Diamanté • Insert coudé vers la droite		MODÈLE : P3D	NSK Satelec® RÉF : Z217403
	 (Vue de-dessus) • Diamanté • Insert coudé vers la gauche		MODÈLE : P10	NSK Satelec® RÉF : Z217410
	 • Bord bien affûté		MODÈLE : P11R	NSK Satelec® RÉF : Z217408
	 • Bord bien affûté • Insert coudé vers la droite		MODÈLE : P11L	NSK Satelec® RÉF : Z217409
	 • Bord bien affûté • Insert coudé vers la gauche		MODÈLE : P20	NSK Satelec® RÉF : Z217420
			MODÈLE : P20-E	EMS® RÉF : Z291420
	 • Insert coudé vers la droite		MODÈLE : P21R	NSK Satelec® RÉF : Z217422
	 (Vue de-dessus) • Insert coudé vers la droite		MODÈLE : P21R-E	EMS® RÉF : Z291422
	 • Insert coudé vers la gauche		MODÈLE : P21L	NSK Satelec® RÉF : Z217421
	 (Vue de-dessus) • Insert coudé vers la gauche		MODÈLE : P21L-E	EMS® RÉF : Z291421

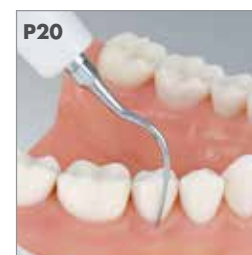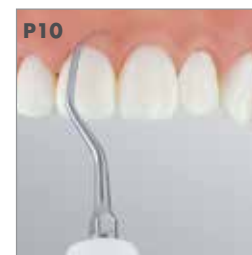

Parodontie (curetage du cément radiculaire)

Diagramme en coupe transversale

			<p>MODÈLE : P25R</p> <p>MODÈLE : P25R-E</p>	<p>NSK Satelec®</p> <p>RÉF : Z217424</p> <p>EMS®</p> <p>RÉF : Z291424</p>	
• Insert coudé vers la droite (Vue de-dessus)					
			<p>MODÈLE : P25L</p> <p>MODÈLE : P25L-E</p>	<p>NSK Satelec®</p> <p>RÉF : Z217425</p> <p>EMS®</p> <p>RÉF : Z291425</p>	
• Insert coudé vers la gauche (Vue de-dessus)					
			<p>MODÈLE : P26R</p>	<p>NSK Satelec®</p> <p>RÉF : Z217426</p>	
• Insert coudé vers la droite					
			<p>MODÈLE : P26L</p>	<p>NSK Satelec®</p> <p>RÉF : Z217427</p>	
• Insert coudé vers la gauche					

Parodontie (Irrigation et Nettoyage)

Diagramme en coupe transversale

			<p>MODÈLE : P40</p>	<p>NSK Satelec®</p> <p>RÉF : Z217550</p>	
• Pour irrigation ø 0.6 mm					
			<p>MODÈLE : P41</p>	<p>NSK Satelec®</p> <p>RÉF : Z217555</p>	
• Pour irrigation ø 0.8 mm					

Double point d'irrigation



Lavables en thermodésinfecteur



Stérilisation en autoclave jusqu'à 135°C

Entretien (inset V)



Support Inset V



MODÈLE : **V10**

NSK Satelec®

RÉF : **Z217041**

- Comprend une clé de remplacement de l'inset E
- * Inset en plastique non inclus



Pour l'entretien des prothèses et des implants. Fabriqué avec matériau spécial permettant un débridement en toute sécurité, sans provoquer de dommages au niveau des implants et/ou des matériaux prothétiques.

Diagramme en coupe transversale



MODÈLE : **V-P10**

RÉF : **Y900184**

- Vendus par 3

Le V-P12 est la version longue du V-P10. Il est utilisé dans un large domaine incluant l'entretien des implants et des prothèses. Sa forme a été étudiée pour permettre un accès facile dans toutes les zones.



MODÈLE : **V-P12**

RÉF : **Y1002167**

- Vendus par 3

Le design en double courbure des inserts V-P11R et V-P11L est idéal pour le travail dans les zones postérieures de la bouche.

Les accès mésiaux et distaux des dents, sans endommager les couronnes, donnent à ces inserts un caractère hautement polyvalent.

Diagramme en coupe transversale



MODÈLE : **V-P11R**

RÉF : **Y1002165**

- Inset courbé vers la droite • Vendus par 3



MODÈLE : **V-P11L**

RÉF : **Y1002166**

- Inset courbé vers la gauche • Vendus par 3

La forme courbée des inserts V-P26R et V-P26L offre un accès aux zones difficiles à atteindre avec la partie terminale de l'inset (zone active) comme les surfaces distales et mésiales des molaires et des dents postérieures.



MODÈLE : **V-P26R**

RÉF : **Y1002168**

- Inset courbé vers la gauche • Vendus par 3



MODÈLE : **V-P26L**

RÉF : **Y1002169**

- Inset courbé vers la droite • Vendus par 3



Endodontie

Diagramme en coupe transversale



• Pour le nettoyage du canal radicaire

MODÈLE : **E4**

NSK Satelec®
 RÉF : **Z217428**



• Diamanté • Pour l'agrandissement du canal radicaire

MODÈLE : **E4D**

NSK Satelec®
 RÉF : **Z217528**



• Eau inutile • Condensation latérale

MODÈLE : **E5**

NSK Satelec®
 RÉF : **Z217305**



• Eau inutile • Condensation latérale

MODÈLE : **E6**

NSK Satelec®
 RÉF : **Z217306**



• Eau inutile • Élimination du plombage et des corps étrangers

MODÈLE : **E7**

NSK Satelec®
 RÉF : **Z217307**



• Diamanté • Élargissement de la paroi du canal radicaire

MODÈLE : **E7D**

NSK Satelec®
 RÉF : **Z217317**



• Eau inutile • Élimination du plombage et des corps étrangers

MODÈLE : **E8**


NSK Satelec®
 RÉF : **Z217308**



• Diamanté • Élargissement de la paroi du canal radicaire

MODÈLE : **E8D**

NSK Satelec®
 RÉF : **Z217318**

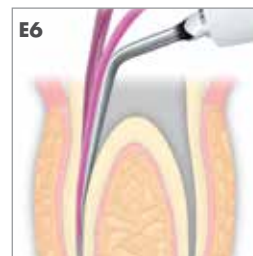

Lavables en thermodésinfecteur



Stérilisation en autoclave jusqu'à 135°C

Endodontie



NSK Satelec®
 MODÈLE : **E15D** RÉF : **Z217319**
 • Diamanté • Pour situer les canaux radiculaires

Support pour limes en U angle 120°



NSK Satelec®
 MODÈLE : **E11** RÉF : **Z217031**
 * La lime est en option.
 • Pour limes en U (ø 0.8 mm) • Pour le nettoyage du canal radiculaire • Pour les dents antérieures

Support pour limes en U angle 95°



NSK Satelec®
 MODÈLE : **E12** RÉF : **Z217032**
 * La lime est en option.
 • Pour limes en U (ø 0.8 mm) • Pour le nettoyage du canal radiculaire • Pour les dents postérieures

MODÈLE **Limes en U 33 mm / # 15** RÉF **Y900062**
 • ISO15 • Vendus par 6

MODÈLE **Limes en U 33 mm / # 20** RÉF **Y900063**
 • ISO20 • Vendus par 6

MODÈLE **Limes en U 33 mm / # 25** RÉF **Y900064**
 • ISO25 • Vendus par 6


MODÈLE **Limes en U 33 mm / # 30** RÉF **Y900065**
 • ISO30 • Vendus par 6

MODÈLE **Limes en U 33 mm / # 35** RÉF **Y900066**
 • ISO35 • Vendus par 6

Chaque lot de E11, E12 et V30 inclut 1 clé de remplacement de l'insert E.
 La clé de remplacement n'est pas incluse lors de la commande d'autres inserts. Veuillez dans ce cas commander la clé de remplacement séparément.

Merci de toujours vous référer à ce tableau pour vous assurer de la bonne longueur de votre lime.

	#15	#20	#25	#30	#35
E11	22 mm	24.5 mm	22 mm	22 mm	22 mm
E12	22 mm	24.5 mm	24.5 mm	24.5 mm	22 mm

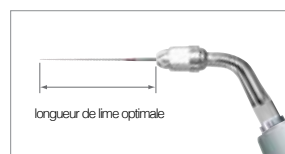

Endodontie par voie rétrograde

Diagramme en coupe transversale



MODÈLE : **E30RD**

NSK Satelec®
 RÉF : **Z217212**

• Diamanté • Pour les dents postérieures (coudé à droite)



MODÈLE : **E30LD**

NSK Satelec®
 RÉF : **Z217213**

• Diamanté • Pour les dents postérieures (coudé à gauche)



MODÈLE : **E31D**

NSK Satelec®
 RÉF : **Z217210**

• Diamanté • Pour les dents antérieures et postérieures (70°)



MODÈLE : **E32D**

NSK Satelec®
 RÉF : **Z217211**

• Diamanté • Pour les dents antérieures (90°)



Lavables en thermodésinfecteur



Stérilisation en autoclave jusqu'à 135°C

Insert en V Endodontique



Support Insert V



NSK Satelec®

MODÈLE : **V30**

RÉF : **Z217030**

Inclus 5 types de limes en U (ø0.8mm) plus une monture 120°

Endodontie

Pour le nettoyage du canal radiculaire

MODÈLE : **V-550** RÉF : **Y900169**

- Pour le nettoyage du canal radiculaire 17mm • Vendu par 3

MODÈLE : **V-551** RÉF : **Y900170**

- Pour le nettoyage du canal radiculaire 23mm • Vendu par 3


MODÈLE : **V-552** RÉF : **Y900171**

- Pour le nettoyage du canal radiculaire 26mm • Vendu par 3

MODÈLE : **V-553** RÉF : **Y900172**

- Pour le nettoyage du canal radiculaire 32mm • Vendu par 3

Nettoyage du canal

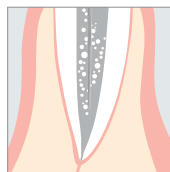

Satelec® est une marque déposée de Acteon SA. EMS® est une marque déposée de Electro Medical Systems SA.



Restauratrice (Pour intervention minimale)



• Diamanté

MODÈLE : **G61D**

NSK Satelec®

RÉF : **Z217601**



• Diamanté

MODÈLE : **G62D**

NSK Satelec®

RÉF : **Z217602**



• Diamanté

MODÈLE : **G65D**

NSK Satelec®

RÉF : **Z217605**



• Diamanté

MODÈLE : **G66D**

NSK Satelec®

RÉF : **Z217606**



• Diamanté

MODÈLE : **G67D**

NSK Satelec®

RÉF : **Z217607**



• Diamanté

MODÈLE : **G68D**

NSK Satelec®

RÉF : **Z217608**



Lavables en thermodésinfecteur



Stérilisation en autoclave jusqu'à 135°C

Condensation



MODÈLE : **G21**

NSK Satelec®

RÉF : **Z217010**

• Eau inutile • Pour les dents antérieures • 3 capuchons fournis



MODÈLE : **G22**

NSK Satelec®

RÉF : **Z217020**

• Eau inutile • Pour les dents postérieures • 3 capuchons fournis



MODÈLE : **Capuchon**

NSK Satelec®

RÉF : **Y140751**

• Stérilisation en Autoclave jusqu'à 135° • Pour G21/G22 (Lot de 10)

Descellement/Obturation



MODÈLE : **G25**

NSK Satelec®

RÉF : **Z217205**

• Eau inutile • Descellement de couronne



MODÈLE : **G26**

NSK Satelec®

RÉF : **Z217206**

• Post-descellement



MODÈLE : **G28**

NSK Satelec®

RÉF : **Z217208**

• Eau inutile • Condensation amalgame



Kit inserts

Application PARODONTIE



NSK Satelec®

MODÈLE : **PARODONTIE Kit A** RÉF : **Y900144**

Contenu

- 1 x P1D, 1 x P2D, 1 x P3D, 1 x P10
- 1 x Support insert

Application PARODONTIE Furcation et face de la racine courbées




NSK Satelec®

MODÈLE : **PARODONTIE Kit B** RÉF : **Y900145**

Contenu

- 1 x P20, 1 x P25R, 1 x P25L
- 1 x Support insert

Application ENDODONTIE Pour irrigation du canal radiculaire antérieur

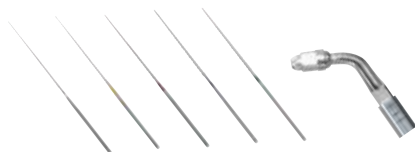

NSK Satelec®

MODÈLE : **Kit Endo E11** RÉF : **Y900146**

Contenu

- 1 x montage E11 à 120° pour dents antérieures
- 1 x clé dynamométrique pour insert E
- Limes en U 33 mm #15, #20, #25, #30, #35 (Emballage par 6 pour chaque taille)

Inclus 5 types de limes en U (ø0.8mm) plus une montage 120°




Lavables en thermodésinfecteur



Stérilisation en autoclave jusqu'à 135°C

Kit inserts

Application **ENDODONTIE** Pour irrigation du canal radiculaire postérieur

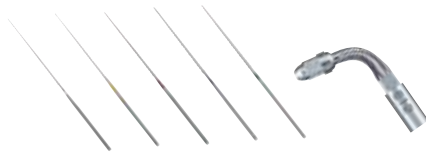

Inclus 5 types de limes en U (ø0.8mm) plus un support à 95°

NSK Satelec®

MODÈLE : **Kit Endo E12**

RÉF : **Y900147**

Contenu

- 1 support à 95° E12 pour dents postérieures
- 1 x clé dynamométrique pour insert E
- Limes en U 33 mm #15, #20, #25, #30, #35 (Vendus par 6 pour chaque taille)

Application **ENDODONTIE** 4 types d'inserts de plombage de la racine rétrograde



NSK Satelec®

MODÈLE : **Kit Rétro**

RÉF : **Y900149**

Contenu

- 1 x E31D, 1 x E32D, 1 x E30RD, 1 x E30LD
- 1 x Support insert

Application **INTERVENTION MINIMALE** Kit de démarrage Intervention Minimale - avec support insertion V



NSK Satelec®




























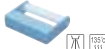

MODÈLE : **Kit de démarrage MI** RÉF : **Y900150**

Contenu

- 1 x Support insert V30
- 1 x clé dynamométrique pour insert E
- 1 x V-G70, 1 x V-G71, 1 x V-G72
- 1 x V-S1, 1 x V-S3, 1 x V-S33
- 1 x V-G77, 1 x V-G78, 1 x V-G79



Pièces détachées

MODÈLE	RÉF	MODÈLE	RÉF	MODÈLE	RÉF	
 LED 135°C 155	VA2-LUX-HP Pièce à main lumière	E351050	 Filtre à eau	Y900069	 Bouteille VA (400 mL) pour Varios 970	Z1047002
 135°C 155	VA2-HP Pièce à main non lumière	E350050	 Élément du filtre à eau	U387042	 Pompe d'irrigation pour Varios 970	10000643
	VA970LUX-SC Cordon pièce à main lumière	E351055	 Bague de tube (Lot de 2)	Y900077	 Joint (Pour cordon pièce à main)	0310020 080
	VA970-SC Cordon pièce à main non lumière	E350055	 Clé dynamométrique (CR-10)	Z221076	 Joint Section mince (Pour bouteille VA)	0312090 100
	FC-70 Pédale (2,5m)	Z1008001	 Clé de remplacement insert E	Z217399	 Joint Section épaisse (Pour bouteille VA)	0310075 150
	FC-71 Pédale (5m) pour Varios 370	Z1008002	 Support pour insert	Z221080	 Support Varios 370	Z254
	Connecteur d'irrigation	U387030	 Couvercle insert L	Z217850	 Varios 350/370 Bras de montage	Z259
	Ensemble filtre à eau (2 tuyaux d'arrivée d'eau, filtre à eau, comp. filtre à eau)	U387040	 Couvercle insert S	Z217851	 Support boîtier de contrôle Varios 370	Y1001812
	Ensemble filtre à eau (4 tuyaux d'arrivée d'eau, filtre à eau, comp. filtre d'eau) pour Varios 370	U1007046	 Boîtier de stérilisation	Z1035001	 Clé à écrou (Lot de 2) (Ex8)	Y1001301
	Tube d'irrigation Tube d'arrivée d'eau (2m) pour Varios 570/970	U387580	 Support pièce à main pour Varios 370	10001505		



Lavables en thermodésinfecteur



Stérilisation en autoclave jusqu'à 135°C



Un large choix d'inserts
pour étendre vos applications clinique

NSK France

www.nsk.fr

32, rue de Lisbonne – 75008 PARIS – France

Tél. : +33 (0)1 56 79 59 80 - Fax : +33 (0)1 56 79 59 81

e-mail : info@nsk.fr

NAKANISHI INC. 

www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi Tochigi 322-88666, Japan

Tél. : +81 (0)289 64 3380 - Fax : +81 (0)289 62 5636

Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.